

ANLAN

INTELGENTNY MASAŻER DO OCZU

INSTRUKCJA OBSŁUGI




Dziękujemy za zakup produktu marki ANLAN. Przed rozpoczęciem jego używania należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi oraz zachować ją celem skorzystania w przyszłości.

Środki ostrożności:

1. Jeżeli używasz soczewek kontaktowych, usuń je przed rozpoczęciem pracy z produktem.
2. Osoby o wrażliwej skórze powinny wykonać próbny test.
3. Należy powoli przesuwac masażerem, nie zostawiac go zbyt dlugo na jednym obszarze skóry.
4. W przypadku korzystania z funkcji wibracji należy unikac jej stosowania na powiekach.
5. W przypadku odczuwania jakiegokolwiek dyskomfortu, należy zaprzestac uzywania produktu.
6. Osoby, które cierpią na poniższe przypadłości prosí się o niekorzystanie z tego produktu:
 - Osoby z chorobami układu krążenia, hemofilią,
 - Osoby z chorobami skóry, np. atopowe zapalenie skóry
 - Osoby z neuralgią twarzy,
 - Osoby ze skłonnościami do alergii, wrażliwą skórą,
 - Osoby w okresie przedmiesiączkowym, w trakcie ciąży oraz osoby, które niedawno rodziły
 - Osoby odczuwające dyskomfort termiczny (odczuwanie ciepła),
 - Osoby, które doznały poparzenia słonecznego na skórze.

OPIS PRODUKTU

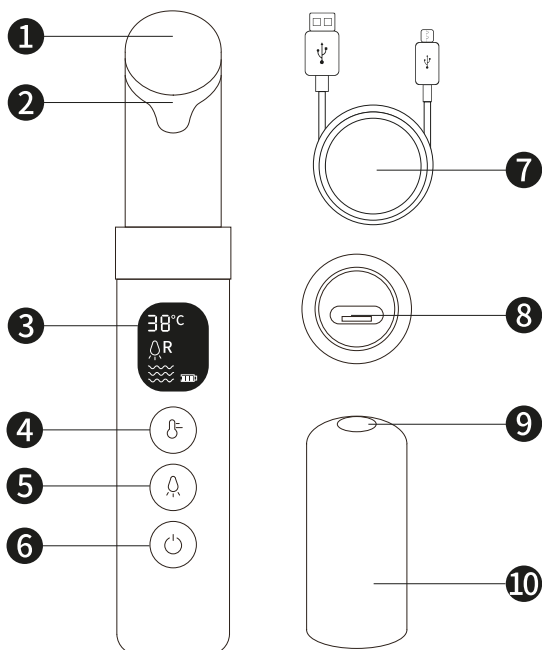

- 1 Głowica masująca
- 2 obieg energii fotonów
- 3 Wyświetlacz LCD
- 4 Przycisk wyboru temperatury
- 5 Przycisk energii fotonów
- 6 Przycisk zasilania/wibracji
- 7 Kabel do ładowania USB
- 8 Port ładowania USB
- 9 Uszczelnienie
- 10 Nakładka przeciwpylowa

Wyświetlacz LCD

Wskaźnik
temperatury

(38-45 °C)



R (czerwone światło)

B (niebieskie światło)

Y (żółte światło)

Trzy tryby wibracji

Wskaźnik baterii

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Nazwa: Inteligentny masażer do oczu

Model: MYY06-02

Materiał: ABS

Wymiary: 130x22x22mm

Waga: około 42g

Pojemność baterii: 400mAh

Moc: 2.5W

Zasilanie: 5V, 1A

Napięcie znamionowe: 3.7 V

Czas ładowania: około 2 godziny

Czas trybu czuwania: około 3 godziny

Automatyczne wyłączenie : po 15 minutach

Zakres temperatur: od 38-45°C

Długość fal światła:

-światło czerwone: 620-630nm


-światło niebieskie: 470nm

-światło żółte: 590nm


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA




Urządzenie główne x1

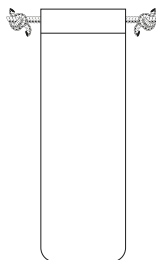

Torba do przechowywania x1

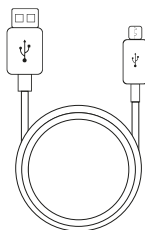


Kabel do ładowania x1

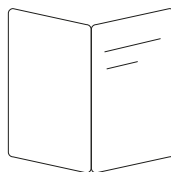

Instrukcja obsługi x1

OPIS TRYBÓW

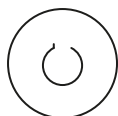

Przycisk zasilania/wibracji:

Długie naciśnięcie przycisku przez około 2 sekundy powoduje włączenie się produktu. Domyślne ustawienia to 38°C/czerwone światło/słaby tryb wibracji.

Krótkie naciśnięcie- wybór trybu wibracji:
słaby-średni-mocny-brak wibracji.

Ponowne długie naciśnięcie przycisku (około 2 sekundy) powoduje wyłączenie się produktu.



Przycisk energii fotonów:

Domyślne ustawienie to światło czerwone. Krótkie naciśnięcie tego przycisku pozwala na wybór innego światła: R (światło czerwone)- B (światło niebieskie)-Y (światło żółte)- brak światła (stop)

Światło czerwone (620-630nm):

Pomaga poprawić aktywność komórek, metabolizm komórkowy, stymulować wzrost kolagenu, a tym samym zwiększyć elastyczność skóry, naprawić wrażliwą skórę i osiągnąć cel wybielania i odmładzania skóry, obkurczania dużych porów.

Niebieskie światło(470nm):

Pomaga stymulować porfiryne w enzymach skóry, aby uwolnić dużą ilość singletowego aktywnego tlenu, tym samym zabijając bakterie beztlenowe, skutecznie lecząc trądzik skórny, pryszczki, itp.

Żółte światło(590nm):

Pomaga rozłożyć melaninę skóry, wspomaga wzrost komórek, pobudza detoksykację limfatyczną, przyspiesza i reorganizuje strukturę skóry właściwej, tworząc w ten sposób delikatną i lśniącą skórę.



Przycisk wyboru temperatury:

Domyślne ustawienie temperatury to 38°C. Krótkie naciśnięcie tego przycisku umożliwia jej wybór od 38°C do 45°C.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Do użytku dla oczu:




1. Umyj twarz aby zmyć makijaż. Po nałożeniu kremu pod oczy wybierz interesujący Cię tryb.




2. Przesuwaj wałek w przód i w tył, robiąc małe kółko od środka do dolnej powieki.

3. Przesuwaj się od wnętrza dolnego oka do wnętrza górnego oka, jak przy rysowaniu półkola.

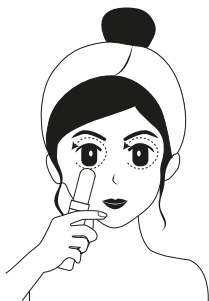


Do użytku do ust:

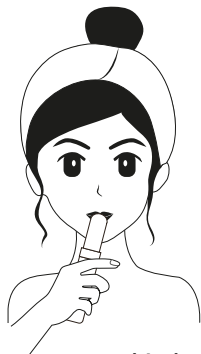

1. Oczyszczyć usta i osuszyć je ręcznikiem papierowym.

2. Nałożyć balsam do ust, poruszając głowicą masującą po ustach.

3. Po zakończeniu zabiegu, naciśnij przycisk wł/wył. przed 2 sekundy aby wyłączyć produkt. Głowicę masującą wytrzyj czystym ręcznikiem lub ręcznikiem papierowym.

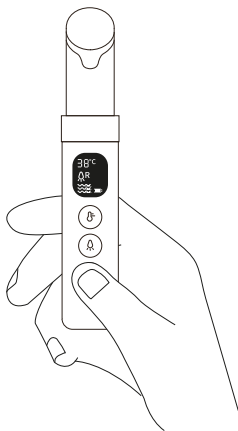

INSTRUKCJE ŁADOWANIA

1. Przed pierwszym użyciem lub w sytuacji, kiedy produkt nie był używany przez dłuższy czas, należy naładować baterię.
2. Podłącz kabel ładowania USB do portu USB komputera osobistego, baterii przenośnej lub adaptera, aby naładować jednostkę główną.
3. Nie używaj go podczas ładowania, odłącz kabel od jednostki głównej po pełnym naładowaniu.
Podczas ładowania miga wskaźnik poziomu baterii, a pełne naładowanie trwa około 2 godziny.

KONSERWACJA

1. Przed masażem należy równomiernie nałożyć krem pod oczy. Po zabiegu należy wyczyścić głowicę masującą tak aby nie pozostał na niej żaden kosmetyk.
2. Głowicę masującą należy wytrzeć przy użyciu wilgotnej chusteczki lub suchego ręcznika papierowego.
3. Produkt należy przechowywać w torbie (dołączona w opakowaniu) w chłodnym i suchym miejscu unikając zanieczyszczeń.
4. Produkt nie należy czyścić za pomocą silnych środków czyszczących ani przy pomocy wody.
5. Produkt nie może być używany gdy nosi jakiegokolwiek ślady uszkodzenia.
6. Nie należy doprowadzać do upadku lub uderzenia produktu.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

P: Nie można włączyć urządzenia. Co należy zrobić?

O: Proszę nacisnąć przełącznik przez 2 sekundy, aby włączyć urządzenie. Jeśli to nie działa, naładuj go około 2 godzin.

P: Nie można było naładować urządzenia. Co zrobić?

O: Upewnij się, że urządzenie zostało prawidłowo podłączone za pomocą kabla do ładowania oraz do sieci elektrycznej. Jeśli tak, zmień adapter lub kabel do ładowania.

P: Urządzenie nie działa po naładowaniu. Co zrobić?

O: Spróbuj ponownie uruchomić urządzenie, jeżeli nadal nie będzie działało skontaktuj się z działem obsługi klienta.

P: Czy produkt może być stosowany codziennie?

O: Tak, produkt nadaje się do codziennego stosowania.

P: Głowica do masażu jest brudna.

O: Proszę przetrzeć ją wilgotną szmatką.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.