



# Pistolet do masażu K1 mini

## Instrukcja

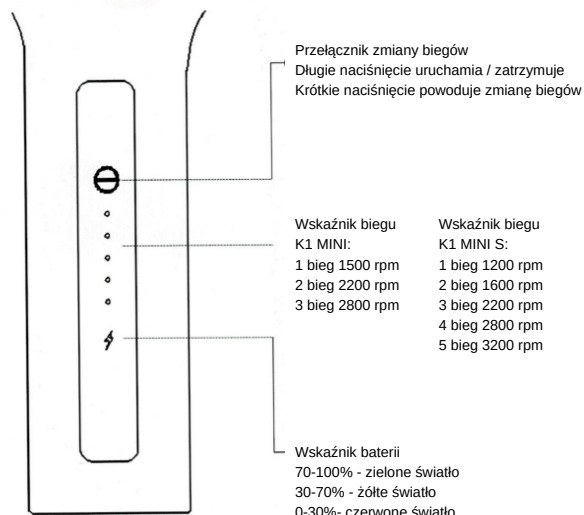

## Zawartość zestawu

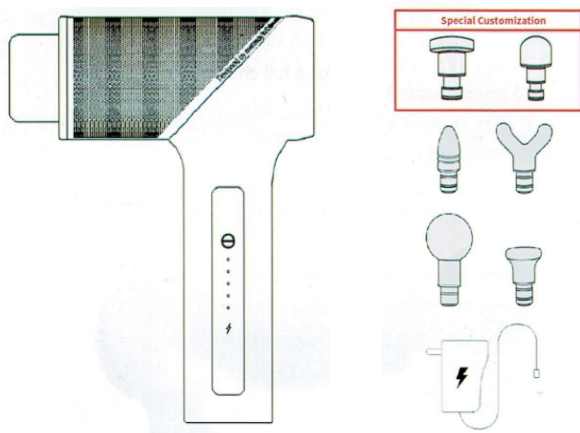

Model K1 mini

Pojemność baterii 2600 Mah

Moc 18-95 W.

Częstotliwość 25hm-36hz-46hz

Wytrzymałość baterii 1-4,5h

Moment obrotowy 0-5,1kg / cm

Amplituda 11 mm

Tryb Intelliigent 10-minutowy inteligentny czas

## Ostrzeżenia

1. Do ładowania urządzenia należy używać oryginalnej ładowarki. Pełne naładowanie trwa 3-5 godzin.
2. Nie używaj tego urządzenia podczas ładowania.
3. Nie wkładać ani nie dotykać szczeliny między głowicą masującą a osłoną palcami lub innymi przedmiotami podczas użytkowania, aby nie przytrzasnąć.
4. Tego urządzenia nie można samodzielnie rozmontowywać ani modyfikować.
5. Ze względu na dużą moc urządzenia, zaleca się używanie go jednorazowo przez 10-20 minut, aby uniknąć fizycznego dyskomfortu.
6. Nie pozwalaj dziecku na samo uderzenie.
7. Jeśli odczuwasz ból lub dyskomfort, natychmiast zaprzestań używania.

Należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem poniższego wniosku.

Pacjenci z osteoporozą, osoby z problemami z sercem z elektronicznym urządzeniem medycznym, kobiety w ciąży, każdy z urazem fizycznym lub innymi powikłaniami medycznymi muszą skonsultować się z lekarzem przed użyciem

Opakowanie zutilizować w sposób przyjazny dla środowiska. To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19 / UE dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Dyrektywa WEEE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego). Dyrektywa określa ramy zwrotu i recyklingu zużytego sprzętu, które mają zastosowanie w całej UE. Zapytaj swojego sprzedawcę o aktualne punkty odbioru. Deklaracja zgodności UE

