



Pistolet do masażu K1 mini S

Instrukcja

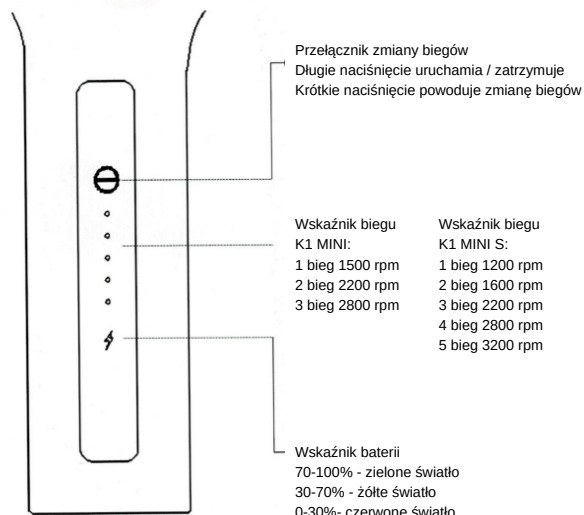

Zawartość zestawu

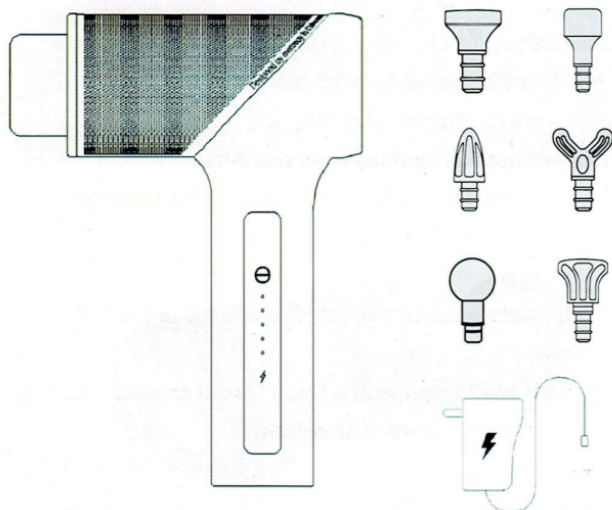

Model K1 mini
Pojemność baterii 3400 Mah
Moc 15-160 W.
Częstotliwość 20hz 26hz-36hz-46hz 53hz
Wytrzymałość baterii 1-5,5h
Moment obrotowy 0-7,5kg / cm
Amplituda 11 mm
Tryb Intelliigent 10-minutowy inteligentny czas

Ostrzeżenia

1. Do ładowania urządzenia należy używać oryginalnej ładowarki. Pełne naładowanie trwa 3-5 godzin, a po pełnym naładowaniu wskaźnik będzie zielony.
2. Nie używaj tego urządzenia podczas ładowania.
3. Nie wkładaj ani nie dotykaj szczeliny między głowicą masującą a osłoną palcami lub innymi przedmiotami podczas użytkowania, aby nie przytrzasnąć.
4. Tego urządzenia nie można samodzielnie rozmontowywać ani modyfikować.
5. Ze względu na dużą moc urządzenia, zaleca się używanie go jednorazowo przez 10-20 minut, aby uniknąć fizycznego dyskomfortu.
6. Nie pozwalaj dziecku na samo uderzenie.
7. jeśli odczuwasz ból lub dyskomfort, natychmiast zaprzestań używania.

Należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem poniższego wniosku.

Pacjenci z osteoporozą, osoby z problemami z sercem z elektronicznym urządzeniem medycznym, kobiety w ciąży, każdy z urazem fizycznym lub innymi powikłaniami medycznymi muszą skonsultować się z lekarzem przed użyciem

Opakowanie zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska. To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19 / UE dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Dyrektywa WEEE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego). Dyrektywa określa ramy zwrotu i recyklingu zużytego sprzętu, które mają zastosowanie w całej UE. Zapytaj swojego sprzedawcę o aktualne punkty odbioru. Deklaracja zgodności UE

