



Inteligentna Szczoteczka Soniczna Oclean

Instrukcja użytkownika

Producent:

Shenzhen Yunding information Technology Co.,Ltd
28th Floor, Building C
No.9676 Shennan Rd
Nanshan District Shenzhen
Chiny

Importer:

Rafał Stępień
Kłobucka 8A/74
02-699 Warszawa
Polska

Jesteśmy tu, aby Ci pomóc!
kontakt@oclean.pl

Dziękujemy, że wybrałeś szczoteczkę Oclean.

Zawartość zestawu:

Kupując szczoteczkę Oclean w zestawie otrzymujesz:

- Szczoteczkę Oclean
- Etui (w przypadku modeli One i SE)
- Jedną główkę
- Przewód USB
- Instrukcję

Ważne informacje bezpieczeństwa:

- Ze względu na drgania o dużej częstotliwości, podczas pierwszego użycia szczoteczki do zębów może pojawić się uczucie klucia. Uczucie to stopniowo zanika podczas regularnego używania szczoteczki.
- Jeśli szczoteczka nie będzie używana przez dłuższy czas, bateria rozładuje się z powodu poboru energii w trybie czuwania. Można to rozwiązać przez ładowanie, wskaźnik ładowania na szczotce nie zaświeci się natychmiast. Oczekaj 6-10 minut, aż szczoteczka do zębów wróci do normalnego stanu.
- Szczoteczka do zębów może się rozgrzać podczas ładowania. Jeśli szczoteczka zostanie podgrzana do bardzo wysokiej temperatury, natychmiast przestań ją ładować i/lub wyłącz szczotkę i zanieś do autoryzowanego centrum diagnostycznego Oclean.
- Ze szczoteczką powinieneś używać jedynie oryginalnych końcówek Oclean.
- Szczoteczka jest przeznaczona jedynie do higieny jamy ustnej. Nie używaj jej w innych celach.
- Szczoteczka Oclean to urządzenie do użytku osobistego. Nie używaj jej w gabinecie dentystycznym lub klinice dentystycznej. Szczoteczka nie powinna być używana przez wielu pacjentów.
- Szczoteczka nie powinna być narażona na promieniowanie słoneczne. Powinna być przechowywana w suchym i chłodnym miejscu.

- Nigdy nie myj szczoteczki lub końcówek w zmywarce
- Pamiętaj, przed myciem ładowarki odłącz ją od zasilania.

Następujące grupy użytkowników powinny stosować tę szczoteczkę ze specjalną uwagą:

- Osoby przechodzące zabiegi stomatologiczne lub będące w trakcie leczenia stomatologicznego.
- Osoby mające problemy ze zdrowiem jamy ustnej, sztucznym uzębieniem oraz krwawiącymi dziąsłami.
- Osoby z nadwrażliwością jamy ustnej powinny skonsultować się z dentystą przed rozpoczęciem korzystania z tej szczoteczki.
- Szczoteczka nie nadaje się dla osób z ograniczonymi możliwościami psychofizycznymi. Szczoteczka nie nadaje się dla dzieci poniżej 12 roku życia oraz dla niemowląt. Dzieci mogą używać szczoteczki jedynie pod nadzorem dorosłych.
- Regularnie czyść gniazdo ładowania aby uniknąć zabrudzeń i zniszczeń, które mogą zmniejszyć wydajność ładowania.
- Nigdy nie używaj podstawy ładującej ani etui podróznego do ładowania, gdy są one w jakikolwiek sposób uszkodzone. Jeśli podstawa ładująca, etui podrózne do ładowania, przewód lub wtyczka są uszkodzone, wymień je na oryginalne elementy tego samego typu, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji

Recykling i utylizacja

Pamiętaj, że ten proces jest nieodwracalny.



Zużytego urządzenia nie należy wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego — należy oddać je do punktu zbiórki surowców wtórnych w celu utylizacji. Akumulator należy oddać do wyznaczonego punktu zbiórki akumulatorów. Stosowanie się do tego zalecenia pomaga w ochronie środowiska. Akumulator należy wyjąć tylko po zakończeniu okresu eksploatacji produktu. Zrobienie tego wcześniej spowoduje uszkodzenie produktu. Podczas usuwania akumulatora należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Jak rozpocząć użytkowanie szczoteczki?



Ostrożnie załóż końcówkę na szczoteczkę. Pomiędzy szczoteczką a główką powinien zostać mały odstęp.



Aby zapobiec rozbryzgiwaniu pasty, nałóż małą ilość pasty. Szczoteczka soniczna potrzebuje mniej pasty niż szczoteczka tradycyjna.



Zwilż główkę szczoteczki i włóż ją do swoich ust, następnie uruchom szczoteczkę.



Powoli przesuwaj włosie pod kątem 45 ° do linii dziąseł, aby prawidłowo szczotkować zęby.



Trzymając szczoteczkę za uchwyt, powoli przesuwaj ją ruchem okrężnym.



Po myciu zębów wypłucz główkę pod bieżącą wodą

Obsługa szczoteczki:

Magnetyczne ładowanie

Gdy szczoteczka Oclean dotknie specjalnej stacji ładującej, podświetli się spód szczotki, co będzie świadczyło o jej ładowaniu. W przypadku nieprawidłowego ładowania (np. zwarcia lub przeładowania) zapali się dioda ostrzegawcza.

Ładowanie

0% - 95%, wskaźnik ładowania błyska
95% - 100%, wskaźnik ładowania stale świeci


Używanie

Jeśli poziom naładowania baterii spadnie poniżej 5%, wskaźnik zasilania będzie migał na czerwono jako przypomnienie, o konieczności naładowania baterii.

Uwaga:

Bateria nie może być wymieniana samodzielnie przez użytkownika. Bateria może zostać wymieniona jedynie w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym Oclean. Zabronione jest nieautoryzowane rozbieranie szczoteczki.

Przewód USB nie może zostać samodzielnie wymieniony, w przypadku uszkodzenia należy skontaktować się ze wsparciem Oclean.

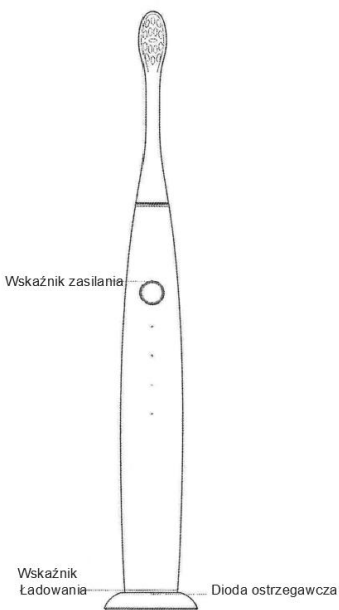

Mycie i obsługa



Mycie główki

Umyj końcówkę szczoteczki po użyciu a następnie wysusz ją. Nie zdejmuj główki do mycia – może to skutkować jej deformacją.



Mycie szczoteczki

Używaj czystej wody do mycia powierzchni szczoteczki, po umyciu osusz ją wykorzystując powietrze i miękką ściereczkę. Nie naciskaj gumowego pierścienia ostrymi lub metalowymi przedmiotami, guma może zostać uszkodzona.



Mycie ładowarki

Umyj brudne części ładowarki wykorzystując miękką ściereczkę. Zdejmij gniazdo ładowania przed rozpoczęciem mycia. Przetrzyj powierzchnię ładowarki wilgotną ściereczką.



Wymiana główki

Zalecamy, aby końcówka szczoteczki była wymieniana co 2-3 miesiące. Pozwoli to zachować dobre parametry mycia.

Użytkowanie:

Tryb przebudzenia (domyślny)

Aby włączyć szczoteczkę do zębów, naciśnij krótko przycisk zasilania, aby odtworzyć dźwięk powitania. Jeśli szczoteczka nie jest używana przez co najmniej 15 sekund to automatycznie przechodzi w stan spoczynku. Krótkie naciśnięcie po aktywacji szczoteczki do zębów aktywuje określony tryb czyszczenia. Zgodnie z planem czyszczenia szczoteczka do zębów automatycznie zatrzymuje się po określonym czasie. Jeśli chcesz przerwać czyszczenie przed osiągnięciem określonego czasu, krótko naciśnij przycisk zasilania, aby zatrzymać czyszczenie.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby zmienić intensywność czyszczenia.

Tryb czyszczenia bez przebudzenia (aktywowany za pomocą aplikacji mobilnej)

Tryb czyszczenia bez przebudzenia można włączyć za pomocą aplikacji mobilnej. Krótkie naciśnięcie przycisku zasilania pomija tryb budzenia i natychmiast rozpoczyna proces czyszczenia.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby zmienić intensywność czyszczenia

Tryb zapobiegający rozpryskiwaniu (aktywowany za pomocą aplikacji mobilnej)

Aktywuj funkcję zapobiegania rozpryskiwaniu poprzez aplikację mobilną Oclean, która skutecznie zapobiega rozpryskiwaniu płynów, gdy szczoteczka nie jest w bezpośrednim kontakcie z zębami


4 tryby czyszczenia:

- Tryb Delikatny (świeci się wskaźnik 1) – dla osób z wrażliwymi zębami które dopiero zaczynają swoją przygodę ze szczoteczkami sonicznymi
- Tryb Łagodny (świeci się wskaźnik 1 i 2) – dla osób które zaczynają korzystać ze szczoteczki sonicznej oraz dla osób z wrażliwymi zębami
- Tryb Standardowy (świecą się wskaźniki 1,2 i 3) – podstawowy tryb mycia, dla osób które korzystały ze szczoteczki sonicznej w przeszłości
- Tryb Mocny (świecą się wszystkie wskaźniki) – doskonały dla osób, które zwiększyły swoje oczekiwania względem szczoteczki

Rekomendacje dotyczące używania szczoteczki

Jak długo powinienem myć zęby?

Dentyści zalecają aby długość każdego mycia zębów wynosiła od 2 do 3 minut. Postaraj się rozdysponować tym czasem równomiernie.

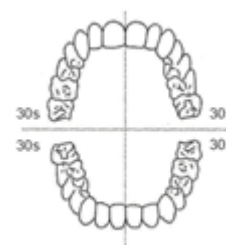

Opakowanie zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska. To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19 / UE dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

(Dyrektywa WEEE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego).

Dyrektywa określa ramy zwrotu i recyklingu zużytego sprzętu, które mają zastosowanie w całej UE. Zapytaj swojego sprzedawcę o aktualne punkty odbioru. Deklaracja zgodności UE

