


ANLAN

Urządzenie ujędrniające
do twarzy i ciała

Instrukcja obsługi

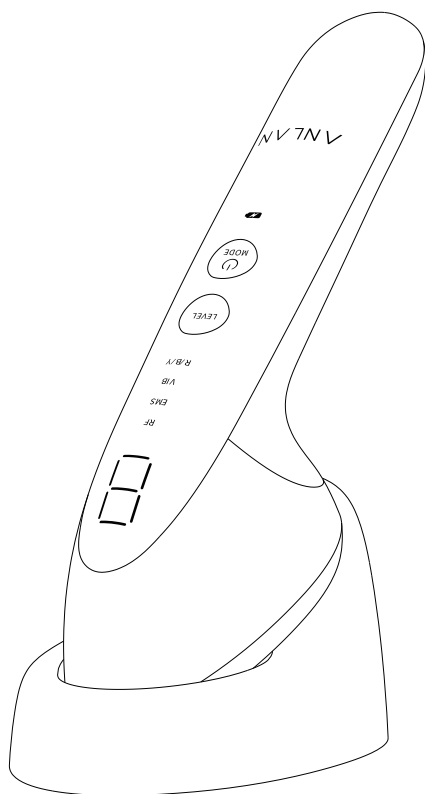

	 Ostrzeżenie
	Prosimy nie używać tego urządzenia z innymi urządzeniami medycznymi:
	• Małe implanty uszkodzone elektromagnetycznie, takie jak rozrusznik serca. • Elektronika medyczna do podtrzymywania życia, np. sztuczne serce / sztuczne płuco. • Przenośna elektronika medyczna, taka jak urządzenie do elektrokardiogramów.
 Uwaga	 Ostrzeżenie
	Osoby wymienione poniżej powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem tego urządzenia:
	• Osoby chorujące na nowotwory • Osoby chorujące na cukrzycę • Osoby z przebytym zapaleniem skóry • Osoby z alergiami • Osoby chore na hemofilię • Osoby z chorobą gorączkową • Osoby z chorobami serca • Osoby z ostrą (bolesną) chorobą • Osoby z nerwobólami twarzy • Osoby z chorobami zakaźnymi • Osoby z nieprawidłowym ciśnieniem krwi • Osoby w ciąży lub w połogu


Nie należy używać produktu na następujących częściach ciała:

- | | |
|--------------------------------|---|
| - głowa, | - jama ustna, narządy płciowe, błona śluzowa, |
| - wszelkie rany, | - obszary z cieńszą skórą, takie jak |
| - gardło, | palce, nadgarstki, kostki, |
| - usta, | - łokcie, kolana, obojczyk i czoło (nieco |
| - uszy, | wyżej niż kość). |
| - nos, | |
| - obszary powyżej serca, | |
| - brodawki wirusowe, kurzajki, | |
| - opuchlizny, znamiona, | |
| - ropne zapalenia skóry, | |

Specyfikacja produktu

Nazwa	Urządzenie ujędrniające do twarzy i ciała
Model	LM-1991
Wymiary urządzenia	ok. 172 x 48 x 58 mm
Wymiary podstawki	ok. 101 x 64 x 55 mm
Waga urządzenia	ok. 140 g
Waga podstawki	ok. 106 g
Czas ładowania	ok. 3 h
Czas nieprzerwanej pracy	ok. 30 minut
Automatyczne wyłączenie	po ok. 20 minutach
Terapia światłem	niebieskie / czerwone / żółte
Tryby	4
Pojemność akumulatora	1000 mAh
Napięcie znamionowe	3,7 V
Napięcie wejściowe	5 V / 1 A


Zawartość zestawu

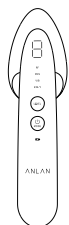


1 x Urządzenie



1 x Podstawka

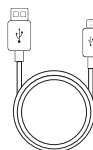


1 x Przewód
USB

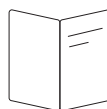

1 x Instrukcja
obsługi

Opis produktu

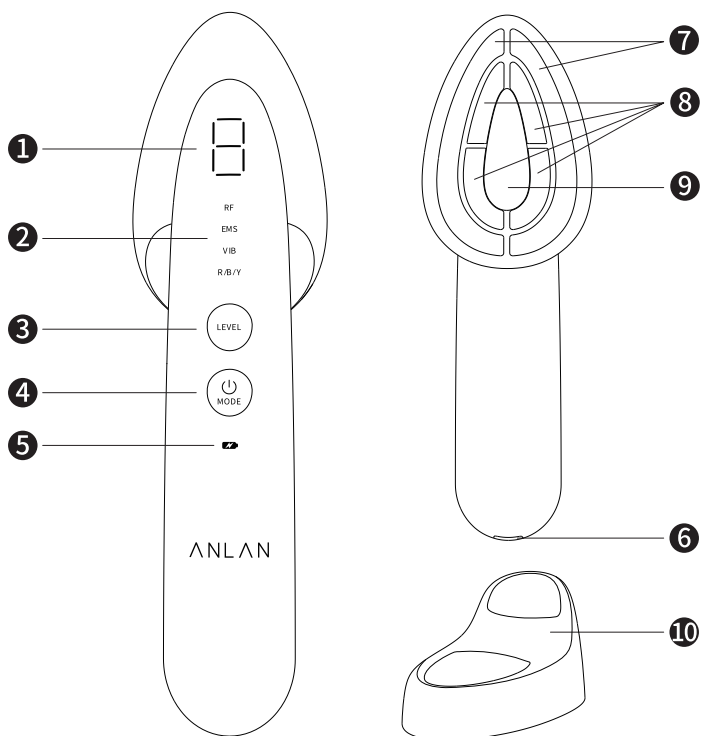

- 1. Wskaźnik poziomu
- 2. Wskaźnik trybu
- 3. Przycisk zmiany poziomu
- 4. Przycisk zasilania/zmiany trybu
- 5. Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

- 6. Port ładowania
- 7. Funkcja EMS
- 8. Funkcja RF
- 9. Podświetlenie LED
- 10. Podstawa

Funkcje przycisków

1. Naciśnij i przytrzymaj  przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć zasilanie.

Nie włączaj urządzenia podczas ładowania.

2. Naciśnij przycisk , aby wybrać tryb.

4 tryby:

- Tryb 1: RF + RBY (terapia światłem),
- Tryb 2: RF + VIB (wibracje) + RBY (terapia światłem),
- Tryb 3: EMS + RBY (terapia światłem),
- Tryb 4: EMS + VIB (wibracje) + RBY (terapia światłem).

Każdy z trybów przełącza się w następujący sposób:

Naciśnij przycisk , aby wybrać poziom.

3 poziomy: przytrzymaj przycisk  za każdym razem, aby przełączać w kolejności 1 - 2 - 3 - 1.

Przy pierwszym użyciu lub do czasu przyzwyczajenia się należy ustawić "Poziom 1 (standardowy)".

Opis trybów

Tryb można ustawić według własnych preferencji lub w zależności od stanu skóry.

Tryb	Kombinacja każdej z funkcji	Zalecenia	Częstotliwość użytkowania	Poziomy
Tryb Facial	RF+VIB +RBY	Tonik, krem, mleczko, serum, żel	2-3 razy na tydzień, 6 min/1 raz	3
Tryb Fitness	EMS+RBY	Balsam do ciała	2-3 razy na tydzień, 6 min/1 raz	3
Tryb Body Shape	EMS+VIB+RBY	Balsam do ciała	Raz na dzień, 12 min/1 raz	3

Tryb	Kombinacja każdej z funkcji	Zalecenia	Częstotliwość użytkowania	Poziomy
Tryb Lift-up	RF + RBY	Tonik, krem, mleczko, serum, żel	2-3 razy na tydzień, 6 min/1 raz	3

Zalecenia przed rozpoczęciem użytkowania

Test na alergię

Nałóż kosmetyk na wewnętrzną stronę nadgarstka/ramienia przed użyciem urządzenia, aby wykonać test na alergię i zapobiec ewentualnym dolegliwościom.


1. Umyj część przeznaczoną do testu (wewnętrzną stronę nadgarstka/ramienia) mydłem i wytrzyj ręcznikiem.
2. Nałóż żel/balsam na niewielką część ciała przeznaczoną do testu.
3. Włącz urządzenie i wybierz tryb 1. Użyj produktu na ramieniu lub nadgarstku dwukrotnie, za każdym razem przez 10 sekund.
4. Odczekaj 24 godziny, aby sprawdzić, czy na skórze nie pojawiły się dolegliwości.

Jeśli w ciągu 24 godzin wystąpi problem ze skórą, należy zaprzestać użytkowania urządzenia z kosmetykiem.

Prawidłowa obsługa produktu

Tryb Lift-up (RF+ RBY)




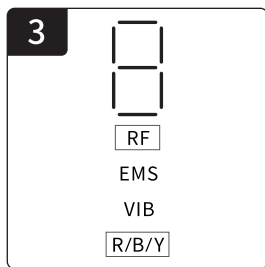

1. Zmocz skórę wilgotnym ręcznikiem.
2. Nałóż na twarz wybrany kosmetyk.
3. Włącz zasilanie, przełącz na funkcję RF+ RBY i wybierz poziom.
4. Delikatnie przesuwaj urządzenie w kierunku lewej strony twarzy przez około 3 minuty.
5. Delikatnie przesuwaj urządzenie w kierunku prawej strony twarzy przez około 3 minuty.

Zaleca się stosowanie 2-3 razy w tygodniu, jednorazowo przez 6 minut.


Tryb Facial (RF+ VIB+ RBY)

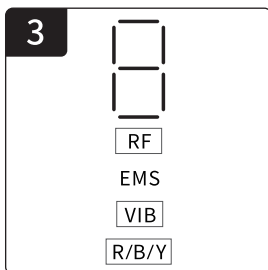

1. Zmocz skórę wilgotnym ręcznikiem.
2. Nałóż na twarz wybrany kosmetyk.
3. Włącz zasilanie, przełącz na funkcję RF+ VIB + RBY i wybierz poziom.
4. Delikatnie przesuwaj urządzenie w kierunku lewej strony twarzy przez około 3 minuty.
5. Delikatnie przesuwaj urządzenie w kierunku prawej strony twarzy przez około 3 minuty.

Zaleca się stosowanie 2-3 razy w tygodniu, jednorazowo przez 6 minut.


Tryb Fitness (EMS+ RBY)


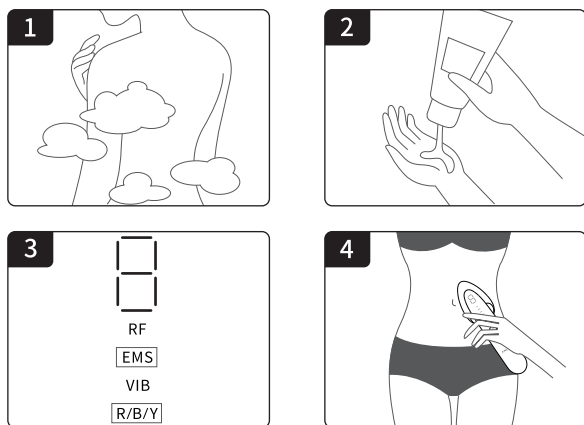


1. Przed rozpoczęciem użytkowania weź prysznic, dokładnie opłucz całe ciało i wytrzyj ręcznikiem do sucha.
2. Nałóż balsam do ciała na brzuch.
3. Włącz zasilanie, przełącz na funkcję EMS+ RBY i wybierz odpowiedni poziom.
4. Powoli przesuwaj urządzeniem po obszarze brzucha przez około 6 minut.

Zaleca się stosowanie 2-3 razy w tygodniu, jednorazowo przez 6 minut.

Tryb Body Shape (EMS+ VIB+ RBY)

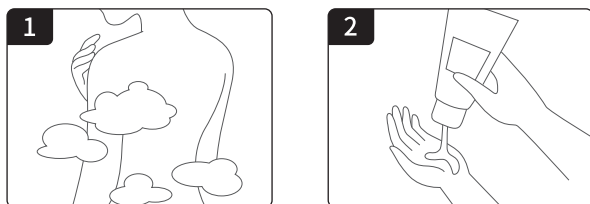

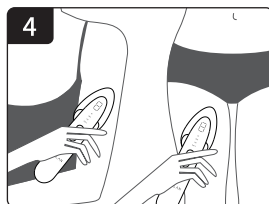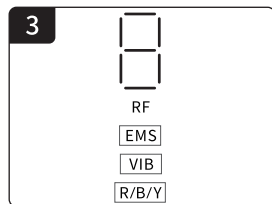

1. Przed rozpoczęciem użytkowania weź prysznic, dokładnie opłucz całe ciało i wytrzyj ręcznikiem do sucha.
2. Nałóż balsam do ciała na ramiona i uda.
3. Włącz zasilanie i przełącz na funkcję EMS+ VIB + RBY, aby wybrać odpowiedni poziom.
4. Powoli przesuwaj urządzeniem po ramionach i udach przez około 12 minut.

Zaleca się stosowanie raz dziennie przez mniej niż 12 minut.

Uwaga

- Podczas użytkowania urządzenie wytwarza 3 intensywne wibracje co 3 minuty (wskazówka dotycząca czasu użytkowania).
- Cztery tryby posiadają również funkcję RBY (terapia światłem). Nie można wybrać tego trybu dowolnie. Światło zmienia się kolejno na czerwono-niebiesko-żółte (20 sekund).
- Jeśli urządzenie nie będzie użytkowane przez 20 minut lub dłużej, zasilanie zostanie automatycznie wyłączone.
- Jeśli chcesz zakończyć pracę w połowie, wyłącz zasilanie.
- Szacunkowa prędkość przesuwania urządzenia: 2 cm/s.

Jeśli odczuwasz intensywne ciepło, przesuwaj urządzenie z większą prędkością.

- Używaj urządzenia tak, aby cała głowica urządzenia dotykała skóry.
- Ciągłe użytkowanie urządzenia w jednym miejscu może spowodować oparzenia lub opuchlizny.
- Pamiętaj o stosowaniu żelu lub balsamu.
- Nie umieszczaj głowicy urządzenia w okolicy powiek i oczu.
- Jeśli czujesz opór podczas przesuwania urządzenia, nałóż więcej balsamu do skóry, aby jej nie obciążać.

Prawidłowy sposób ładowania

Podczas ładowania urządzenia, jego zasilanie nie zostanie włączone.

Gdy urządzenie jest używane po raz pierwszy lub gdy nie jest używane przez dłuższy czas, poziom akumulatora może nie być wystarczający. Naładuj akumulator, aby zachować jego wydajność.

Podczas ładowania wskaźnik miga na czerwono, a po zakończeniu ładowania wskaźnik zacznie stale świecić na biało.

Podczas ładowania obudowa urządzenia może się lekko nagrzewać.

Aby zapobiec przeładowaniu, po zakończeniu ładowania należy odłączyć przewód. Jeśli po zakończeniu ładowania będziesz kontynuować ładowanie przez dłuższy czas, wbudowany akumulator zmniejszy wydajność, a jego żywotność ulegnie skróceniu.

Odpowiednia temperatura pomieszczenia do ładowania wynosi od 15 do 30°C. Ładowanie w niskiej temperaturze może zmniejszyć wydajność akumulatora, dlatego należy ładować urządzenie w odpowiedniej temperaturze. Ponadto w niskich temperaturach możliwe jest zmniejszenie szybkości ładowania.

Aby zachować wydajność akumulatora, należy go ładować raz w miesiącu, jeśli nie będzie użytkowany przez dłuższy czas.

Jeśli czas pracy jest zbyt krótki nawet przy pełnym naładowaniu akumulatora, skontaktuj się z działem obsługi klienta lub serwisem.

Przechowywanie i konserwacja

Aby utrzymać urządzenie w czystości, czyść je po każdym użyciu. Pozostawienie zanieczyszczeń i wilgoci może spowodować pojawienie się pleśni i odbarwień.

Podczas czyszczenia pamiętaj o wyłączeniu zasilania. Włączone zasilanie podczas czyszczenia może spowodować porażenie prądem, zwarcie lub pożar.

Ponieważ nie jest to produkt wodoodporny, nie można czyścić go wodą.

Zetrzyj zabrudzenia na obudowie za pomocą miękkiej ściereczki lub chusteczki higienicznej. Jeśli zabrudzenia nie zejdą, przetrzyj je delikatnie ściereczką zwilżoną rozcieńczonym neutralnym detergentem.

Nie używaj alkalicznych środków czyszczących, alkoholu, rozcieńczalnika, benzyny, zmywacza do paznokci oraz podobnych substancji do czyszczenia urządzenia.

Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie umieszczaj urządzenia w niestabilnym miejscu. Nie zostawiaj produktu w gorącym i wilgotnym miejscu (w pobliżu ognia, pod bezpośrednim słońcem, w łazience itp.)

Nie demontuj, nie naprawiaj ani nie modyfikuj urządzenia samodzielnie. W tym celu skontaktuj się z działem obsługi klienta lub serwisem.

Nie umieszczaj na produkcie ciężkich przedmiotów ani nie upuszczaj go podczas użytkowania, aby nie narażać go na silne uderzenia.

Jeśli produkt nie był użytkowany przez dłuższy czas, przed jego użyciem sprawdź, czy działa prawidłowo.

Brak utylizacji produktu może spowodować uszkodzenie akumulatora, wszelkie wycieki, pożar lub obrażenia ciała spowodowane wydzielaniem się ciepła, a także zanieczyszczenie otoczenia. W celu określenia sposobu utylizacji należy postępować zgodnie z klasyfikacją lokalnych przepisów.

W przypadku nieprzestrzegania powyższych środków ostrożności i ostrzeżeń producent nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia ciała, nieprawidłowe działanie, uszkodzenia itp. spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, demontażem, modyfikacją, czy naprawą.

Rozwiązywanie problemów

P: Co oznacza, że urządzenie do pielęgnacji twarzy RF wykorzystuje fale radiowe?

O: Urządzenia do twarzy RF to urządzenia, które wytwarzają ciepło Joule'a za pomocą fal elektromagnetycznych (fal radiowych). Fale radiowe stosowane w urządzeniach do twarzy rozprzodkują ciepło do wewnętrznych warstw skóry.

P: Głowica urządzenia się nie nagrzewa.

O: Technologia RF nie ogrzewa głowicy elektrody.

P: Czy mogę używać produktu na dłoniach i ciele?

O: Produkt może być użytkowany na dłoniach i ciele.

P: Czy mogę używać produktu w wannie?

O: Ten produkt nie jest wodoodporny. Nie należy używać go podczas kąpieli.

P: Po użyciu urządzenia moja skóra jest gorąca.

O: Jest to spowodowane nagrzewaniem się skóry w wyniku działania fal radiowych. W razie potrzeby można schłodzić skórę, przykładając do niej okład z lodu.

P: Po zakończeniu użytkowania nie są widoczne żadne efekty.

O: Przed użyciem urządzenia nałóż na skórę balsam lub żel. Możesz też zwiększyć poziom mocy. Efekt działania różni się u poszczególnych osób. Efekt zazwyczaj jest widoczny po długotrwałym stosowaniu.

P: Czy można używać produktu codziennie?

O: Zaleca się używać produktu 2-3 razy w tygodniu, przez 6 minut na jedno użytkowanie.

* Nadmierne stosowanie może obciążać skórę.

P: Jakie kosmetyki stosować po zakończeniu użytkowania?

O: Zaleca się stosowanie kosmetyków, które stosuje się na co dzień, w zależności od stanu skóry po użyciu.

P: Co zrobić, jeśli kosmetyk pozostawia plamy lub powoduje problemy skórne?

O: Nie stosuj kosmetyku do czasu wygojenia się zmian skórnych. Skóra może być wrażliwa (należy skonsultować się z lekarzem). Problemy mogą wystąpić również z powodu stanu fizycznego, stresu, uwarunkowań genetycznych i wszelkich chorób.

P: Czy można zastąpić problematyczny kosmetyk innym kosmetykiem?

O: Zaleca się stosowanie żeli, esencji pielęgnacyjnych i balsamów przeznaczonych do danego obszaru ciała.

Należy pamiętać o stosowaniu odpowiednich kosmetyków podczas włączonych funkcji RF i EMS.

W przypadku kosmetyków oleistych transmisja fal radiowych i EMS może być utrudniona.

Jeśli czujesz opór podczas przesuwania urządzenia, nałóż więcej balsamu do skóry, aby jej nie obciążać.

Uwaga: Ze względu na indywidualne różnice w częstotliwości i czasie użytkowania, unikaj nadmiernego użytkowania na wrażliwych obszarach skóry.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.