


# ANLAN

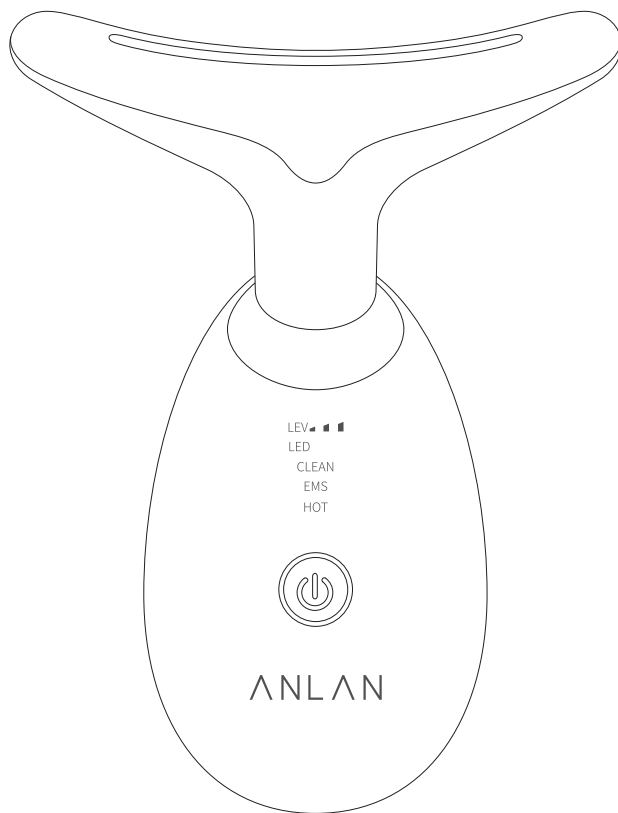

## Instrukcja obsługi

### Masażer terapeutyczny

\* Ten produkt nie urządzeniem medycznym przeznaczonym do kuracji medycznych, lub diagnostyki. Niniejszy produkt jest przedmiotem gospodarstwa domowego. Dziękujemy za zakup maski LED ANLAN. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniego użytkowania, upewnij się, by przeczytać całą instrukcję. Prosimy o dołączenie niniejszej instrukcji w przypadku przekazania tego produktu innym użytkownikom.

# ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Nie zaleca się korzystania z produktu przez niniejsze osoby:

- Ludzie po operacjach plastycznych twarzy
- Ludzie z metalowymi podskórnymi implantami
- Kobiety w ciąży

2. Każdy tryb urządzenia może być używany raz dziennie, w przeciwnym razie mogą wystąpić podrażnienia.

3. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do pielęgnacji twarzy i szyi.

4. W przypadku wrażliwej skóry, nie zaleca się korzystania z urządzenia codziennie, dla osób z wrażliwą skórą zalecane jest korzystanie z urządzenia maksymalnie 1 raz w tygodniu.

5. Przytrzymaj włącznik przez 1 sekundę by wyłączyć urządzenie. Korzystanie z urządzenia podczas ładowania jest zabronione.

6. Przytrzymaj metalowe paski czujnika po obu stronach produktu ( by uformować łuk przylegający do ciała) odpowiednie dopasowanie pomaga uzyskać najlepsze efekty działania produktu..


7. Produkt korzysta z technologii jonizacji przy użyciu mikro-napięcia. Podczas korzystania z produktu może wystąpić uczucie delikatnego mrowienia, co jest normalne. Prosimy się tym nie martwić.

8. Do korzystania z trybu „CLEAN” można użyć jedynie wody micelarnej, prosimy nie używać do tego celu płynu do demakijażu ani innych środków kosmetycznych.

9. W celu czyszczenia urządzenia użyj suchej szmatki, mycie urządzenia pod wodą jest zabronione.

10. Prosimy o nie trzymanie urządzenia w wilgotnych miejscach, jak łazienka, może to spowodować spięcie elektryczne.

# Wprowadzenia do produktu

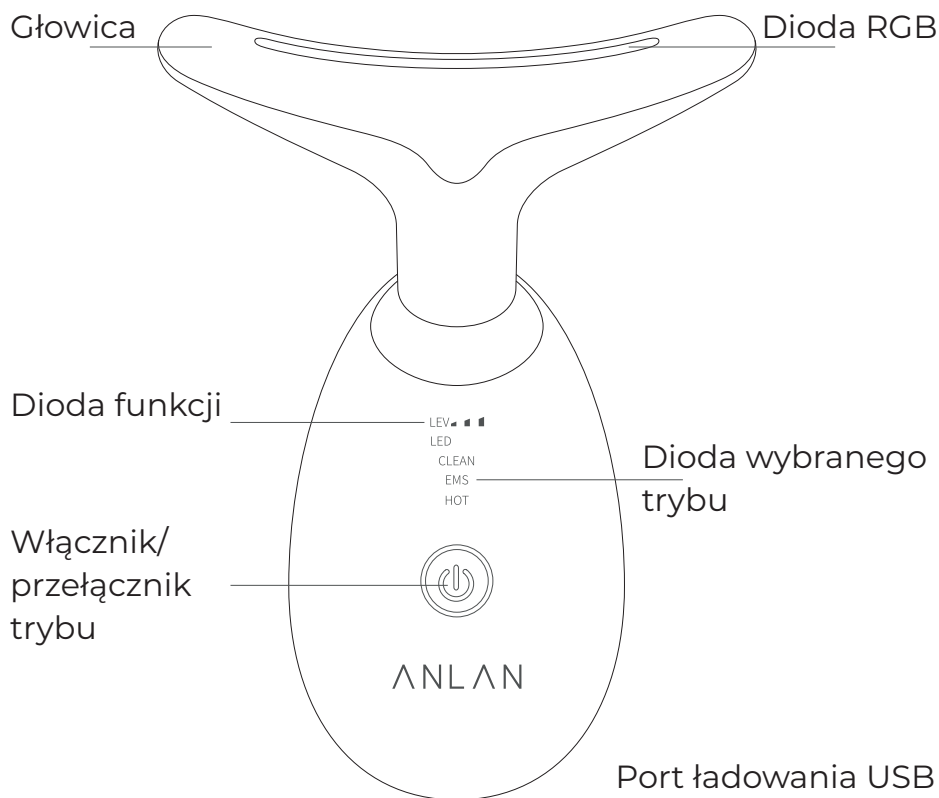

# Specyfikacja

|                            |                                                                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa                      | Masażer terapeutyczny<br>(Neck beauty device)                                                                 |
| Model                      | ES – 081                                                                                                      |
| Materiał                   | ABS                                                                                                           |
| Moc wyjściowa              | 3.7V                                                                                                          |
| Pojemność baterii          | 500mAh                                                                                                        |
| Moc                        | 2.5W                                                                                                          |
| Moc wejściowa              | 5V=1A                                                                                                         |
| Rozmiar                    | 89x47x120mm                                                                                                   |
| Automatyczne<br>wyłączanie | Po około 5ciu minutach                                                                                        |
| Czas ładowania             | Okolo 2godziny                                                                                                |
| Zawartość opakowania       | Masażer terapeutyczny, przewód USB<br>do ładowania, Instrukcja obsługi, torba<br>do przechowywania urządzenia |

# Funkcje

Niniejszy produkt jest masażerem terapeutycznym z funkcją światła LED RGB. Urządzenie służy do czyszczenia oraz rozjaśniania skóry, terapii EMS, terapii ciepłem, nawilżania skóry. Urządzenie posiada funkcję jonizacji skóry jonami plusowymi oraz minusowymi.

## Funkcja plusowych i minusowych jonów



Funkcja plusowych i minusowych jonów wykorzystuje zasadę wchłaniania plusowych i minusowych jonów w celu pozbycia się zalegających zanieczyszczeń w głębokich porach skóry. Funkcja ta ma również za zadanie dokładne wyczyszczenie porów skóry przez zjawisko jonoforezy. Składniki jonów wchodzą w głęboką skórę.



## Funkcja wibracji

Funkcja wibracji wykorzystuje mechaniczne wibracje oraz stymulację mikro-napięciem by napinać skórę oraz zwiększyć jej elastyczność oraz metabolizm.



## Funkcja ciepła

Funkcja ciepłego masażu poprawia proces wchłaniania zmarszczek, co prowadzi do rozciągnięcia i wchłonięcia zmarszczek. Po zabiegu ciepła skóra staje się bardziej elastyczna.



## Funkcja czerwonego światła

Funkcja czerwonego światła może efektywnie stymulować skórę, odżywiać kolagen w skórze, redukować niedoskonałości oraz pomniejszać zmarszczki.



## Funkcja niebieskiego światła

Funkcja niebieskiego światła może efektywnie poprawiać jakość skóry, redukować trądzik, pryszcze, oraz zabijać bakterie naskórne. Długotrwałe korzystanie z tej funkcji może prowadzić do odmłodzenia skóry oraz poprawienia jej ogólnej kondycji.



### **Funkcja zielonego światła.**

Funkcja zielonego światła poprawia mikro cyrkulację krwi w skórze, drenażuje układ limfatyczny oraz redukuje obrzęki skóry.

## **Cechy urządzenia**



### **Funkcja czyszczenia (CLEAN)**

Funkcja czyszczenia pozbywa się zanieczyszczeń z porów skóry, eliminuje trądzik przebarwienia skórne.



### **Funkcja EMS (EMS)**

Funkcja EMS służy do efektywnej stymulacji oraz relaksu skóry. Funkcja ta pomaga skórze produkować oraz utrzymywać odpowiednią wilgotność skóry właściwej.



### **Funkcja nawilżania (HOT)**





Funkcja nawilżania delikatnie pobudza oraz relaksuje skórę. Funkcja ta pomaga utrzymać witalność i odpowiednie nawilżenie skóry.

# Jak korzystać z urządzenia

## Funkcja czyszczenia

- funkcja ta może efektywnie pozbywać się zabrudzeń z porów skóry oraz rozjaśniać skórę
- podczas łączenia funkcji czyszczenia z trybem zielonego światła, może wspierać to mikro cyrkulację krwi w skórze, drenować limfę oraz redukować obrzęki skóry





1. Przytrzymaj włącznik przez 1 sekundę by włączyć urządzenie oraz tryb „CLEAN” (ten tryb pracuje automatycznie z trybem zielonego światła)
2. Rozprowadź równomiernie wodę micelną po skórze twarzy lub szyi. (urządzenie nie jest wodoodporne, więc nie rozprowadzaj wody bezpośrednio po urządzeniu).
3. Przytrzymaj metalowe paski czujnika po obu stronach produktu (by uformować łuk przylegający do ciała) odpowiednie dopasowanie pomaga uzyskać najlepsze efekty działania produktu.
4. Przesuwaj głowicę urządzenia od dołu do góry szyi.

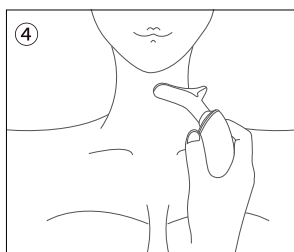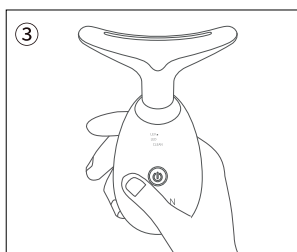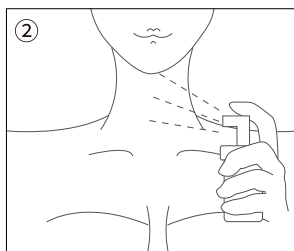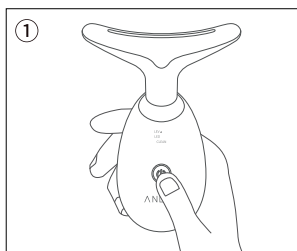

## Funkcja EMS

- Funkcja EMS służy do efektywnej stymulacji oraz relaksu skóry. Funkcja ta pomaga skórze produkować oraz utrzymywać odpowiednią wilgotność skóry właściwej.
- Podczas łączenia funkcji z trybem czerwonego światła, może to efektywnie stymulować skórę, rewitalizować kolagen skóry, redukować zmarszczki.

1. Przytrzymaj włącznik przez 1 sekundę by włączyć urządzenie, następnie kliknij włącznik ponownie by wyłączyć tryb „EMS” ( ten tryb pracuje automatycznie z trybem czerwonego światła)
2. Rozprowadź równomiernie balsam po skórze.
3. Przytrzymaj metalowe paski czujnika po obu stronach produktu.
4. Przesuwaj głowicę urządzenia od dołu do góry szyi.

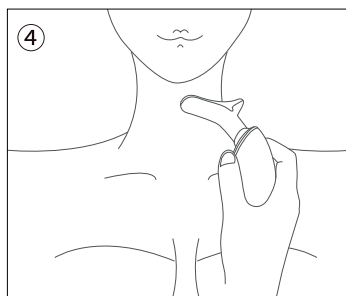
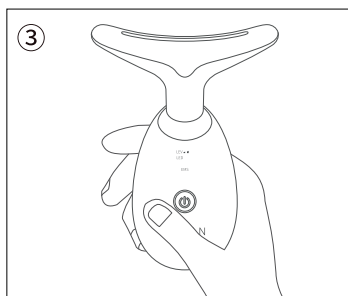
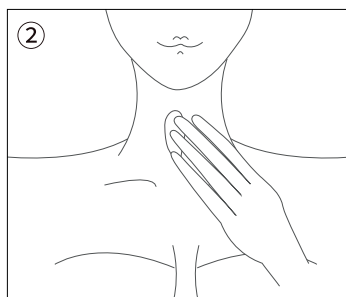
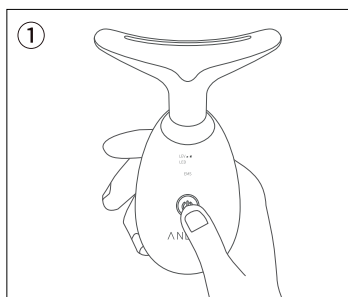


## Funkcja nawilżania


Funkcja nawilżania delikatnie pobudza oraz relaksuje skórę. Funkcja ta pomaga odzyskać vitalność i odpowiednie nawilżenie skóry.

- podczas łączenia funkcji z trybem niebieskiego światła, może pomagać to w rozwiązywaniu problemów skórnych. Funkcja ta pomaga redukować trądzik, pryszcze, bakterie skórne. Podczas dłuższego korzystania z tej funkcji, może to przyczynić się do wspierania procesu odmładzania skóry.


1. Przytrzymaj włącznik przez 1 sekundę by włączyć urządzenie, następnie kliknij dwukrotnie włącznik ponownie by włączyć tryb nawilżania (ten tryb pracuje automatycznie z trybem niebieskiego światła)
2. Zaaplikuj maskę do twarzy lub szyi.
3. Przytrzymaj metalowe paski czujnika po obu stronach produktu.
4. Przesuwaj głowicę urządzenia od dołu do góry szyi.

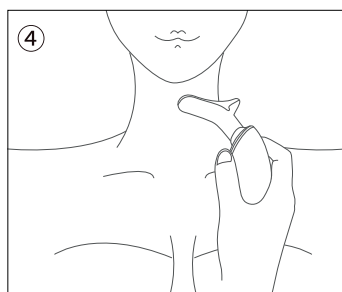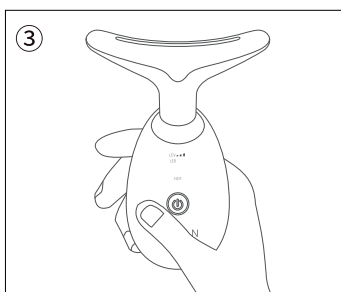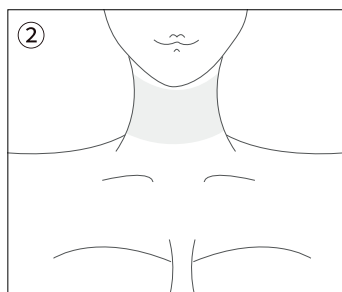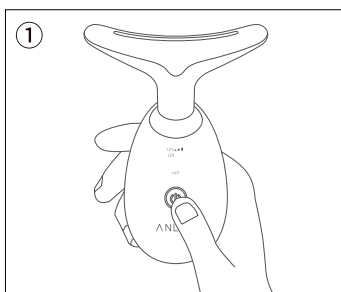


# Jak korzystać z głowicy urządzenia

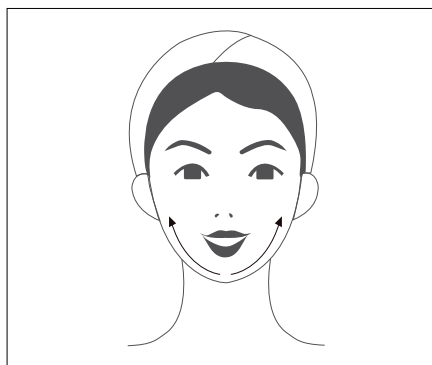


- ① Przesuwaj głowicę od podbródka do policzka

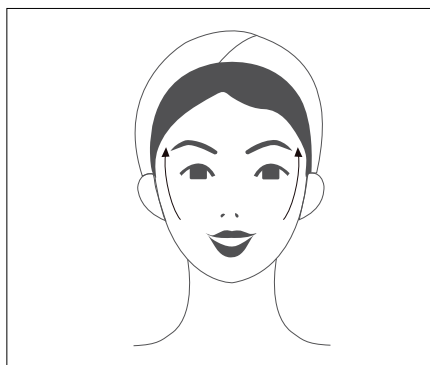

- ② Przesuwaj głowicę od policzka do kącika oka

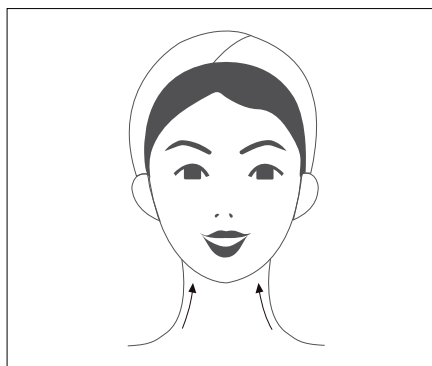

- ③ Przesuwaj głowicę od dolnej części szyji do podbródka

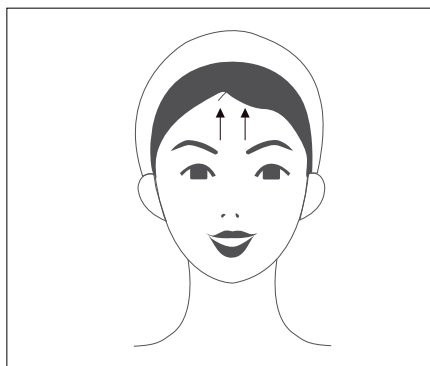

- ④ Przesuwaj głowicę od dolnej części czoła do górnej części czoła

ANLAN