

# Urządzenie do twarzy inFace 5 w 1 BF-06E



## WPROWADZENIE

Profesjonalny zabieg kosmetyczny bez wychodzenia z domu!

inFace 5 w 1 to połączenie impulsu elektrycznego, częstotliwości radiowej, jonów, fototerapii, zimnych i gorących okładów. Urządzenie posiada aż 5 trybów: Oczyszczanie i wtłaczanie, Nawilżanie, Lifting i ujędrnianie, Usuwanie zmarszczek, Tryb chłodzący.

Głowica urządzenia jest niezwykle wytrzymała, odporna na przebarwienia oraz korozję korozję. Jest to jedyny metal, który nie ma wpływu na nerwy autonomiczne człowieka. Zastosowana powłoka sprawia, że urządzenie jest odpowiednie dla każdego typu skóry, nawet tej najbardziej wrażliwej!

## ZALETY



Urządzenie inface 5 w 1 stymuluje tkanki podskórne, powoduje skurcze i reorganizację komórek, przyczynia się do wytwarzania nowego kolagenu. Poprawia drobne linie i zmarszczki na powierzchni skóry oraz przywraca młodzieńczą, gładką, miękką i białą skórę.

## Wskazówki dotyczące użytkowania:

1. Przed użyciem należy dokładnie oczyścić skórę twarzy.
2. Z Należy zdjąć kolczyki, łańcuszki, protezy oraz soczewki kontaktowe.
3. Na głowicę urządzenia można nałożyć niewielką ilość żelu bądź kremu. Nie zaleca się przeprowadzania zabiegu "na sucho".
4. Naciśnij i przytrzymaj przez 1,5 sekundy, aby włączyć, następnie wykonuj określone ruchy głowicą.
5. Trzymaj głowicę magnetyczną w stosunku do powierzchni skóry i przesuwaj ją z jednakową prędkością. W tym momencie poczujesz, że energia ciepła jest przenoszona do warstwy skóry właściwej. Podczas pracy trzymaj równomiernie całą powierzchnię głowicy w kontakcie ze skórą.

## WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1. Przed użyciem należy przeczytać wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowo je używać.
2. Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi, aby korzystać z tego urządzenia.
3. Nie ściągaj ani nie przerabiaj urządzenia.
4. Używaj urządzenia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji.
5. nie przechowuj ani nie używaj urządzenia w miejscach o wysokiej temperaturze i wilgotności, np. Na słońcu, w pobliżu ognia, w łazience itp. Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem, nie używaj ani nie umieszczaj go w urządzeniu lub w jego pobliżu.
- 6 Nie używaj i nie umieszczaj urządzenia w stanie mokrym w przypadku zwarcia, porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
7. Trzymaj urządzenie z dala od dzieci i osób niepełnosprawnych, aby umożliwić jego użycie, konieczny jest ścisły nadzór, gdy urządzenie jest obsługiwane przez użytkownika poniżej 18 roku życia.
8. przechowuj poza zasięgiem dzieci.
9. kobiety w ciąży i osoby z nadciśnieniem, chorobami serca nie mogą używać.
10. Zabrania się korzystania z urządzenia osobie nadmiernie wrażliwej na choroby skóry.

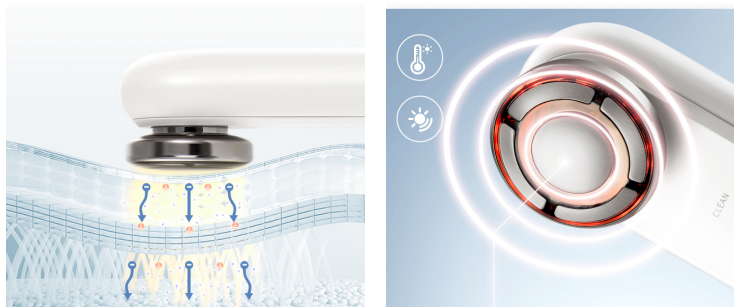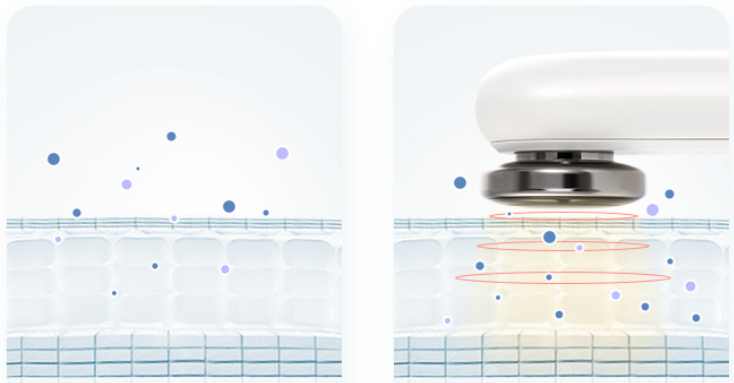

1. Aby uniknąć awarii lub pożaru, przestań używać w przypadku nietypowego nagrzania. 2. Nie upuszczaj ani nie uderzaj urządzenia.

3. Serum należy nakładać stale podczas stosowania.
4. Nie używaj go, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony.
5. Poniższe warunki nie pozwalają na:

choroby serca, gorączkę, chorobę zakaźną, raka, otwarte skaleczenia, ostrą chorobę, niedociśnienie, nadciśnienie, wszczepienie rozrusznika serca, sztuczne lub leczone serce, choroby skóry, oparzenia słoneczne, u osób wrażliwych, anapetie.

## Specyfikacja:

- MODEL - BF-06E
- Rozmiar: 170,8 mm x 47,9 mm x 42,4 mm
- Pojemność baterii: 1500mAh
- Czas działania: około 50 minut
- Materiał/składnik: ABS

Opakowanie zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska. To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19 / UE dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Dyrektywa WEEE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego). Dyrektywa określa ramy zwrotu i recyklingu zużytego sprzętu, które mają zastosowanie w całej UE. Zapytaj swojego sprzedawcę o aktualne punkty odbioru. Deklaracja zgodności UE

