




Instrukcja obsługi Irygatora Soft Care Ultrasonic Usmile

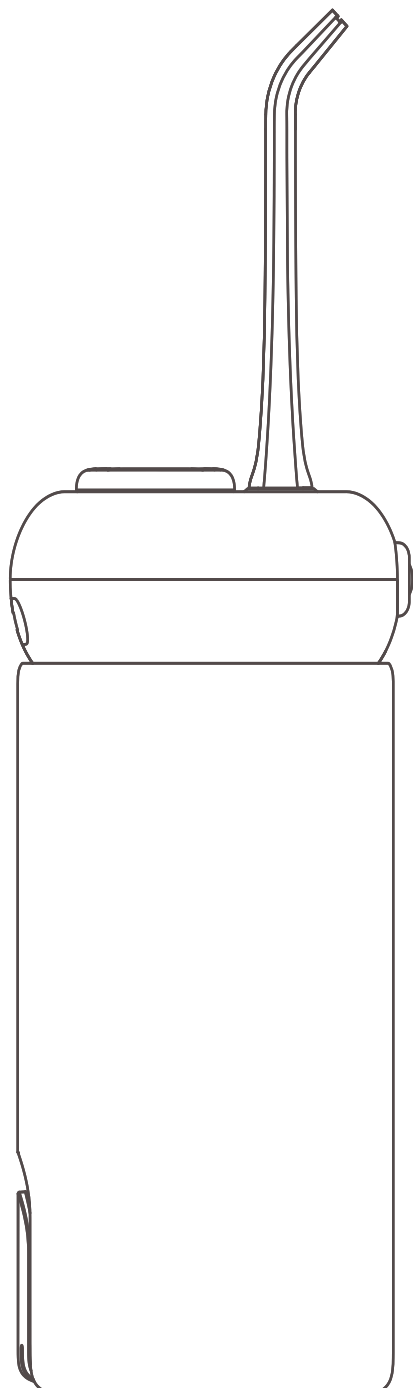

Model CY1

Informacje o produkcie

Nazwa produktu: usmile Soft Care Ultradźwiękowy flosser do wody

Nazwa marki: Usmile

Model produktu: CY1

Wejście znamionowe: 5V == 1A

Moc znamionowa: 5W

Poziom wodoszczelności: IPX7

Specyfikacja baterii: Bateria litowo-jonowa 3,7V 2500 mAh


Producent: Guangzhou Stars Pulse Co., Ltd.

Wyprodukowano w Chinach


Krótki przewodnik




Otwórz pokrywę i włóż dyszę

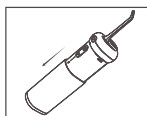


Wyciągnij zbiornik do linii wskaźnika

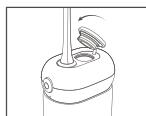


Zamknij pokrywę

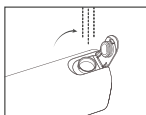

Zdejmij pokrywę ze zbiornika i dodaj umiarkowaną ilość płynu czyszczącego

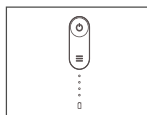

Wybierz tryb czyszczenia

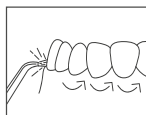

Umieść dyszę w ustach, ustawiając ją w taki sposób, aby była prostopadle do obszaru, który ma być płukany, a następnie naciśnij przycisk aby rozpocząć czyszczenie

Przypomnienie: W przypadku pierwszego użycia lub osób o wrażliwych dziąsłach sugerowany jest tryb delikatny, aby użytkownik mógł stopniowo przyzwyczać się do produktu. aby użytkownik mógł stopniowo przyzwyczać się do produktu. Nie należy strzelać wody bezpośrednio w kierunku dziąseł. Normalnym zjawiskiem jest lekkie krwawienia podczas pierwszego użycia lub bezpośrednio po nim.

Środki ostrożności

Oświadczenia

Możliwe jest wystąpienie łaskoczącego podrażnienia i/lub niewielkiego krwawienia podczas pierwszego użycia, ponieważ dziąsła nie są przyzwyczajone do tego skutecznego sposobu czyszczenia. Dlatego, na początku zalecany jest tryb delikatny. Jednak ten stan ustąpi w ciągu jednego lub dwóch tygodni. Jeśli stan ten nie ulegnie znacznej poprawie po dwóch tygodniach, należy zaprzestać stosowania produktu i niezwłocznie skonsultować się z lekarzem stomatologiem.

Ostrzeżenia

1. Użytkownicy, którzy mają skorygowane, naprawione lub wszczepione zęby, powinni używać produktu produkt wyłącznie za radą stomatologa.
2. Ten produkt nie jest zalecany do stosowania przez osoby chore na cukrzycę i białaczkę.
3. Nie używać produktu do celów innych niż zamierzone czyszczenie jamy ustnej. W przypadku wystąpienia dyskomfortu lub bólu podczas stosowania produktu, należy zaprzestać i niezwłocznie skonsultować się z lekarzem stomatologiem.
4. Nie wlewaj do zbiornika do czyszczenia jamy ustnej wody o temperaturze wyższej niż 40°C. W przeciwnym razie może dojść do poparzenia.
5. Jeżeli podczas ładowania produkt wpadnie do wody, należy najpierw wyciągnąć wtyczkę, a następnie wyjąć produkt.

Zakazy

1. Nie należy mocno dociskać dyszy do dziąseł lub zębów, gdyż może to spowodować się zranić.
2. Podczas ładowania należy upewnić się, że wtyczka zasilania i interfejs są suche i czyste. Plamy lub zanieczyszczenia mogą wpłynąć na bezpieczeństwo ładowania.
3. Ten produkt zawiera wbudowany akumulator. Nie wolno wrzucać go do ognia, ładować, używać ani umieszczać w miejscach narażonych na działanie wysokich temperatur.

4. Nie upuszczaj ani nie przewracaj produktu. Jeśli urządzenie ulegnie uszkodzeniu w wyniku kolizji lub uderzenia, należy zaprzestać używania urządzenia i skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.

5. Nie próbuj modyfikować, demontować ani naprawiać produktu. Wszelkie naprawy należy kierować do firmy lub wykwalifikowanego serwisu.

Ważne uwagi

1. W przypadku uszkodzenia portu lub kabla ładowarki nie należy jej używać.

2. Po zakończeniu ładowania należy odłączyć kabel ładowarki od produktu i wyłączyć zasilanie.

3. Nie należy umieszczać urządzenia w gorącym lub wilgotnym miejscu ani wystawiać go na bezpośrednie światło słoneczne.

4. Nie należy używać produktu podczas brania prysznica lub kąpieli.

5. Ten produkt jest zgodny z normami bezpieczeństwa dla urządzeń elektromagnetycznych. Jeśli masz jakiegokolwiek obawy dotyczące stymulatorów serca lub innych urządzeń wszczepialnych, przed użyciem produktu należy skonsultować się z lekarzem lub producentem urządzenia do implantacji produktu.

Przypomnienia

1. Nie należy udostępniać dyszy innym osobom.

2. Nie należy używać produktu bez dyszy.

3. Nie wlewać do produktu czystego płynu do płukania jamy ustnej. Jeżeli chcesz zastosować płyn do płukania jamy ustnej, należy go najpierw rozcieńczyć.

4. Nie owijaj kabla ładowarki wokół produktu podczas ładowania.


5. Nie należy czyścić urządzenia rozcieńczalnikiem do farb, benzenem, alkoholem ani żadnymi innymi chemikaliami.

6. Osoby nieposiadające pełnej sprawności umysłowej, odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy (w tym małe dzieci) muszą używać, czyścić i konserwować produkt pod nadzorem i instrukcją swoich opiekunów.

Ważne

Wszystkie obrazy produktów, części i interfejsów użytkownika w tym podręczniku są wyłącznie do celów ilustracyjnych. Rzeczywisty produkt może się różnić w przypadku zmian konstrukcyjnych.

Schematyczne rysunki komponentów

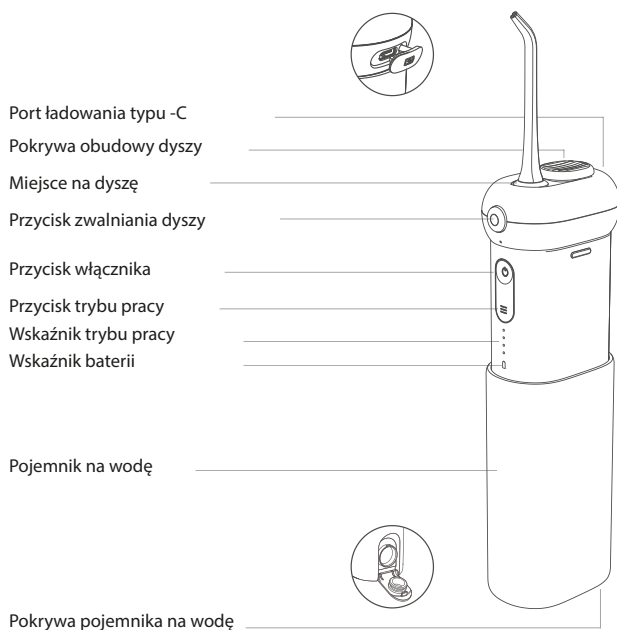

Na podstawie powyższej listy należy sprawdzić, czy elementy produktu są kompletne.

Sposób użytkowania irygatora marki Usmile

Stan baterii i ładowanie

Bateria irygatora marki Usmile jest w pełni naładowana przed dostarczeniem do użytkownika zatem można go używać od razu.

Wskaźniki biały/czerwony




Czerwony wskaźnik- niski poziom naładowania baterii. Naładuj baterię
Biały wskaźnik- W użyciu/ ładowanie/
bateria w pełni naładowana

W celu naładowania, umieść irygator w suchym miejscu. Otwórz pokrywę portu ładowarki znajdującą się z boku urządzenia. Użyj kabla ładowarki ze standardowym portem ładowarki typu-C. Do ładowania użyj ładowarki USB lub powerbanku standardowego w Twoim kraju lub regionie.

Do ładowania użyj adaptera ładowarki USB lub powerbanku o napięciu 5V == 1A. Nie używaj ładowarki o mocy wyjściowej wyższej niż 15W lub słabej jakości, aby uniknąć uszkodzenia produktu.

Testy produktu wskazują, że pełne naładowanie trwa około 4 do 5 godzin. Niemniej jednak czas ładowania zależy od pozostałego poziomu naładowania baterii oraz środowiska, w którym odbywa się ładowanie.

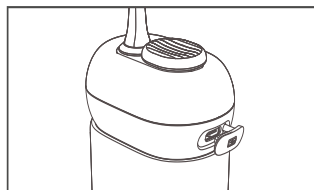

Wskaźnik zasilania będzie migał na biało, gdy produkt będzie ładowany. Będzie on świecił na biało gdy bateria będzie w pełni naładowana. Gdy poziom naładowania baterii spadnie poniżej 20%, wskaźnik zasilania będzie migał na czerwono. Irygator może działać normalnie jeszcze przez siedem dni. Należy go wkrótce naładować. Jeśli bateria jest wyczerpana, wskaźnik zasilania zacznie migać, a następnie zacznie świecić na biało, aby pokazać stan ładowania po kilku minutach po podłączeniu produktu do kabla ładowarki.

Aby uniknąć zmniejszenia pojemności akumulatora lub uszkodzenia akumulatora z powodu braku energii elektrycznej, staraj się nie zużywać w pełni naładowanego akumulatora. Podczas ładowania irygator powinien być ułożony płasko. Upewnij się, że zakryłeś port ładowarki po naładowaniu, zanim zaczniesz używać irygatora.



Port ładowarki jest zakryty





Port ładowarki nie jest zakryty

Wkładanie i wyjmowanie specjalnej dyszy Usmile

1. Weź do ręki specjalną dyszę w dłoń i mocno włożyć ją w gniazdo dyszy, aż do zatrzaśnięcia.

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zwalniający dyszę, jednocześnie delikatnie wyciągnij dyszę.

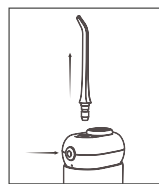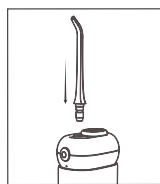




Ostrzeżenie: Nie należy naciskać przycisku zwalniającego dyszę podczas pracy urządzenia.

Sposób dolewania wody

1. Zdejmij pokrywę z pojemnika i wyciągnij zbiornik poza linię wskaźnika.

2. Dodaj umiarkowaną ilość czystej wody.

3. Zakryj zbiornik.

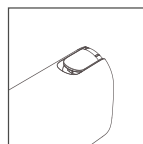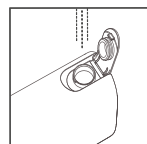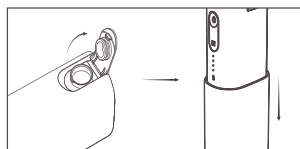

Sugestia: Używaj czystej wody z kranu lub wody oczyszczonej. Jeśli woda jest nieprzyjemnie zimna, należy użyć letniej wody o temperaturze nieprzekraczającej 40°C. Ewentualnie napełnij zbiorniczek specjalnym płynem do czyszczenia Usmile lub rozcieńczonym płynem do płukania jamy ustnej.

Wybór trybu i rozpoczęcie czyszczenia

Produkt ten posiada tryby masażu: delikatny, normalny i intensywny. Po wybraniu trybu urządzenie osiągnie ustawioną moc danego trybu w przeciągu 3 sekund.

Tryb masażu: Niskie impulsy są odpowiednie do masażu dziąseł lub czyszczenia przyzębia.

Tryb miękki: Diastemy i powierzchnia zęba są czyszczone delikatnie i komfortowo. Ten tryb jest odpowiedni do pierwszego użycia lub dla osób z wrażliwymi dziąsłami.

Tryb normalny: Diastemy i powierzchnia zęba są czyszczone z umiarkowaną siłą. Ten tryb jest odpowiedni dla większości osób.

Tryb intensywny: W tym trybie czyszczone są diastemy i uporczywe przebarwienia zębów.

Włączanie/wyłączanie zasilania:

Włącz i wyłącz irygator poprzez wciśnięcie przycisku włącznika.

Wybór trybu pracy:

Naciśnij przycisk trybu, aby przełączać między trybami.




Tryb pamięci:


Po włączeniu urządzenia zostanie wybrany tryb, który był używany ostatnio.

Sposób użytkowania

1. Wybierz preferowany tryb.
2. Umieść dyszę w jamie ustnej, ustawiając ją tak, aby znajdowała się prostopadłe do powierzchni zęba, diastemy lub dziąsła.

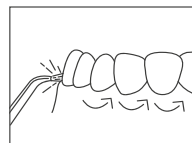

3. Naciśnij przycisk włącznika irygatora a następnie pochyl się nad umywalką lekko zamykając usta aby zapobiec wylaniu się wody poza umywalkę.

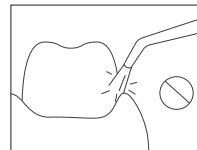

Trzymaj produkt w pozycji pionowej, tak aby wlot wody znajdował się zawsze poniżej poziomu wody. Przepływ wody nie zostanie zatrzymany.

Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby zatrzymywało się po upływie dwóch minut. W celu kontynuacji korzystania z urządzenia wystarczy nacisnąć ponownie przycisk wyłącznika.

Czyszczenie i konserwacja

Czyszczenie po użyciu:

Zaleca się, aby po użyciu wyczyścić i wysuszyć produkt, aby uniknąć rozwoju bakterii.

1. Wyłączyć produkt. Otworzyć pokrywę zbiornika i opróżnić go.
2. Wypłukać zbiornik czystą wodą.
3. Ponownie nacisnąć przycisk włącznika, aby włączyć produkt i spuścić pozostałą wodę.
4. Wcisnąć zbiornik do góry i przechowywać produkt w odpowiednim miejscu.

Konserwacja po użyciu:

Dysza

Oplucz dyszę, a następnie osusz ją miękką szmatką. Zaleca się, aby dyszę wymieniać co sześć miesięcy. Jeśli dysza jest zdeformowana lub ma plamy wody, które wpływają na skuteczność czyszczenia, należy ją wymienić.

Zbiornik

Przepłucz zbiornik. Otwórz pokrywę zbiornika lub pokrywkę, aby zbiornik mógł wysuszyć się w naturalny sposób w dobrze wentylowanym miejscu. Zaleca się, aby zbiornik czyścić co tydzień.

Korpus

Przetrzeć korpus miękką i suchą ściereczką lub chusteczkami. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie w celu wyczyszczenia.

Rurka absorpcyjna

Wyczyść rurkę wodą i wytrzyj ją miękką ściereczką. Nie należy jej składać.

Filtr


Wyczyść filtr wodą lub miękką szczotką, a następnie osusz go miękką ściereczką. Nie należy wyjmować go do czyszczenia.

Ochrona środowiska


Lrygator Usmile zawiera wbudowaną baterię litowo-jonową, którą można ponownie naładować. Nie wyrzucaj jej razem z odpadami domowymi. Należy ją sklasyfikować zgodnie z prawami i przepisami obowiązującymi w Twoim kraju lub regionie.

Uwaga: Przed wyjęciem baterii należy upewnić się, że jest ona całkowicie zużyta.


Wyjmowanie akumulatora

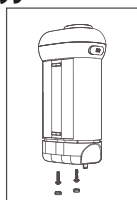

Przy pomocy śrubokręta typu Philips odkręć śruby umieszczone na spodzie urządzenia

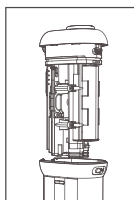

Wymyj wewnątrz urządzenia

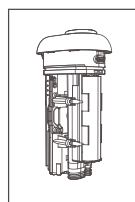

Użyj nożyczki w celu przecięcia przewodów łączących je z akumulatorem a następnie wyjmij akumulator

Uwaga: Nie należy przecinać obu przewodów jednocześnie. Akumulator należy poddać recyklingowi lub utylizacji. Należy skontaktować się z centrum recyklingu wyznaczonym przez władze lokalne, aby dowiedzieć się, czy prowadzi ono recykling innych części i komponentów tego urządzenia do płukania wody. Nie należy łączyć dodatniego i ujemnych biegunów akumulatora, ponieważ może dojść do ich zwarcia. Nie należy próbować uruchamiać produktu po wyjęciu akumulatora.

Usterki i sposoby ich usuwania

Usterka	Przyczyna	Rozwiązanie
Brak wody podczas pierwszego użycia urządzenia	Brak wody w dyszy ze względu na dłuższe nieużywanie urządzenia.	Uruchom urządzenie w trybie normlanym i zaczekaj aż urządzenie zacznie pobierać wodę
Urządzenie nie włącza się po wciśnięciu przycisku włącznika	Urządzenie ładuje się	Wstrzymaj ładowanie
	Zbyt niski poziom naładowania akumulatora	Użyj kabla do ładowania w celu naładowania akumulatora
Brak możliwości włożenia dyszy do gniazdka dyszy	W gniazdku znajduje się ciało obce	Użyj narzędzi aby usunąć ciało obce z gniazdka
	Dysza nie jest kompatybilna z tym modelem Usmile.	Użyj dyszy kompatybilnej z danym modelem Usmile
Produkt zatrzymuje się, a wskaźnik miga na czerwono.	Zabezpieczenie przed zablokowaniem wirnika.	Włącz ponownie urządzenie
	Zbyt niski poziom naładowania akumulatora	Użyj kabla do ładowania w celu naładowania akumulatora
Zbyt niskie ciśnienie wody	Niski poziom naładowania akumulatora	Użyj kabla do ładowania w celu naładowania akumulatora
	Dysza jest zatkana.	Wymień ją na nową, kompatybilną z urządzeniem
Przepływ wody nie jest ciągły.	Odpadł wężyk absorpcyjny	Wyciągnij wężyk, sprawdź czy nie jest uszkodzony i włóż go ponownie
	Zbyt niski poziom wody bądź wężyk nie jest zanurzony w wodzie	Uzupełnij zbiornik wodą

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.