


inFace Sonic Cleanse Device

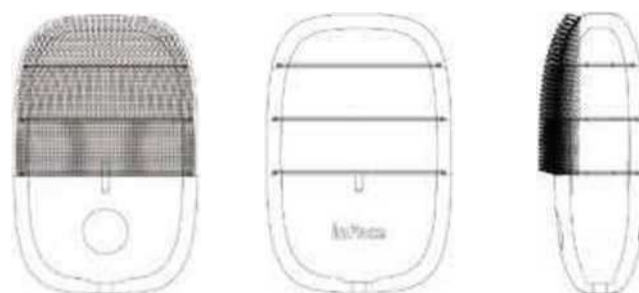


Najważniejsze informacje o MS2000:

- 1) Trzy różne strefy wypustek – głębsze oczyszczenie
- 2) Silikonowe włoski posiadają certyfikat FDA
- 3) Klasa wodoszczelności 1PX7
- 4) Certyfikat RoHS/FDA
- 5) Różnorodność kolorystyczna
- 6) Wyróżniona nagrodą w konkursie If design award 2019
- 7) Zaawansowany tryb wibracji – idealnie gładka cera

| | |
|----------------------------|------------------------------------------|
| Model produktu: | wersja uaktualniona MS-2000 |
| Rozmiar: | 80 mm * 53 mm * 30,4 mm |
| Waga: | ok. 83g |
| Pojemność baterii: | 400mAh |
| Napięcie: | 5v |
| Natężenie: | 200mA |
| Czas ładowania: | ok. 2,5 godziny |
| Czas pracy ciągłej: | ok. 240 minut |
| Temperatura pracy min-max: | -10C-40C |
| Materiał: | FDA certyfikat - silikon klasy medycznej |



Użytkowanie:

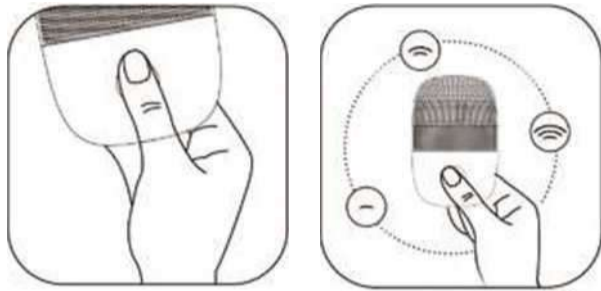


1) Przytrzymaj przycisk ok. 1-2 sekund, aby włączyć urządzenie.

* Szczoteczka wyłączy się automatycznie po 90 sekundach bezczynności.

2) Naciśnij przycisk, aby wybrać odpowiedni program. Do wyboru mamy 3 tryby pracy.

3) Aby wyłączyć urządzenie, przytrzymaj przycisk ok. 1-2 sekund.

Pielęgnacja twarzy:

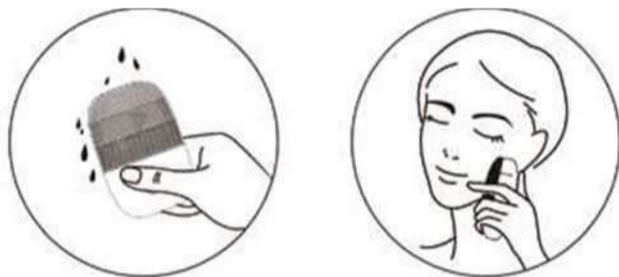

1) Nałóż na twarz oraz szczoteczkę delikatny żel / piankę do czyszczenia.

2) Uruchom urządzenie i wybierz odpowiedni tryb pracy.



3) Umyj twarz szczoteczką, powoli przesuwając ją po każdej części twarzy. Zaleca się wykonywanie delikatnych, okrężnych ruchów.

4) Zmyj pozostałości żelu myjącego letnią wodą i kontynuuj swoją codzienną pielęgnację.

Czyszczenie:

1. Przytrzymaj przycisk, aby wyłączyć urządzenie. Opłucz je pod bieżącą wodą.

2. Otrząśnij pozostałości wody z produktu i umieść ją w suchym, wentylowanym miejscu. Nie nakładaj przezroczystej pokrywy do momentu całkowitego wysuszenia.

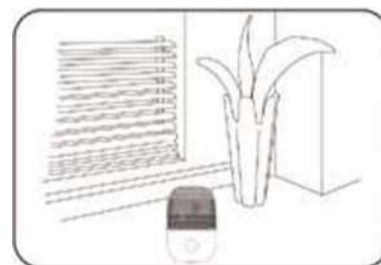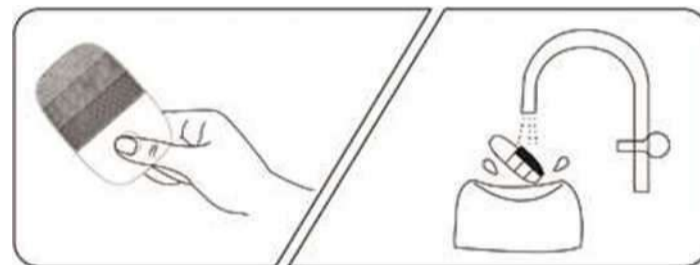

Środki ostrożności:

Postępuj zgodnie z zaleceniami lekarza lub dermatologa, jeśli masz problemy skórne, takie jak: trądzik, rany czy blizny.

W przypadku cery wrażliwej, zaleca się stosowanie urządzenia na najniższym poziomie.

Produkt nie jest zalecany do długotrwałego moczenia w wodzie, może to wpłynąć na jego działanie lub uszkodzenie urządzenia.

Nie należy korzystać z urządzenia podczas ładowania.

Nie należy pozostawiać urządzenia w słonecznym miejscu - może to wpłynąć na wydajność silikonu i zmniejszyć żywotność szczoteczki.

Opakowanie zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska. To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19 / UE dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

(Dyrektywa WEEE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego).

Dyrektywa określa ramy zwrotu i recyklingu zużytego sprzętu, które mają zastosowanie w całej UE. Zapytaj swojego sprzedawcę o aktualne punkty odbioru. Deklaracja zgodności UE

