

Pistolet do masażu

Instrukcja obsługi

Głęboka stymulacja mięśni zapewniana przez masaż wibracyjny może przynieść wszystkie następujące korzyści:

- * Łatwość miękkiej regeneracji mięśni
- * Przyspieszenie regeneracji mięśni
- * Poprawa przepływu krwi
- * Poprawa reakcji mięśni
- * Uwalnianie kwasu mlekowego
- * Stymulowanie wzrostu mięśni
- * Szybkie zwiększenie zakresu ruchu

Parametry techniczne:

Model: K1S

Nazwa handlowa: Pistolet do masażu powięzi głębokich mięśni

Napięcie znamionowe: DC 25.2V

Moc: 20-220W

Częstotliwość znamionowa: 20-55Hz

Czas trwania: Najwyższa ranga 2.7H

1. Zasilanie MASAŻERA

Aby włączyć masażer po prostu przerzucić przełącznik do pozycji włączonej w dolnej części uchwytu, po zakończeniu wcisnąć klawisz zasilania, w którym momencie diody LED zapalą wskaźnik naładowania baterii. Po wykonaniu tej opcji naciśnij klawisz prędkości, aby wybrać optymalną prędkość.

2. Ładowanie akumulatora

Aby naładować baterię, wystarczy podłączyć adapter do dolnej części masażera. Upewnij się, że masażer jest w pozycji wyłączonej, po podłączeniu adaptera ściennego wskaże czerwony, gdy jest ładowany i zielony po pełnym naładowaniu. Wyłącz dolny przełącznik, jeśli masażer nie będzie używany przez dłuższy czas.



UWAGA: Przed pierwszym użyciem należy naładować baterię do pełna.

OSTREŻENIE !

1. Nie używaj tego urządzenia podczas ładowania.
2. Nie wkładaj ani nie dotykaj szczeliny między głowicą do masażu a skorupą palcami lub innymi przedmiotami podczas użytkowania, aby nie doznać urazu.
3. Nie zezwalaj dzieciom na samodzielne korzystanie.
4. Ta maszyna nie może być samodzielnie zmontowana lub zmodyfikowana
5. Ze względu na dużą moc tej maszyny zaleca się używać go przez 10-20 minut na raz, aby uniknąć fizycznego dyskomfortu.
6. Pamiętaj, aby naładować urządzenie, należy naładować skorzystać z oryginalnej ładowarki.
7. Jeśli wystąpi ból lub dyskomfort, należy natychmiast zaprzestać stosowania.

Należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem poniższego wniosku.

Pacjenci z osteoporozą, osoby z problemami z sercem z elektronicznym urządzeniem medycznym, kobiety w ciąży, każdy z urazem fizycznym lub innymi powikłaniami medycznymi muszą skonsultować się z lekarzem przed użyciem

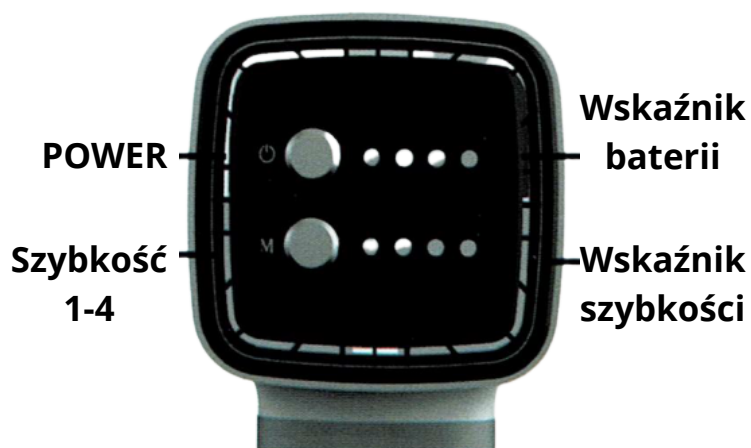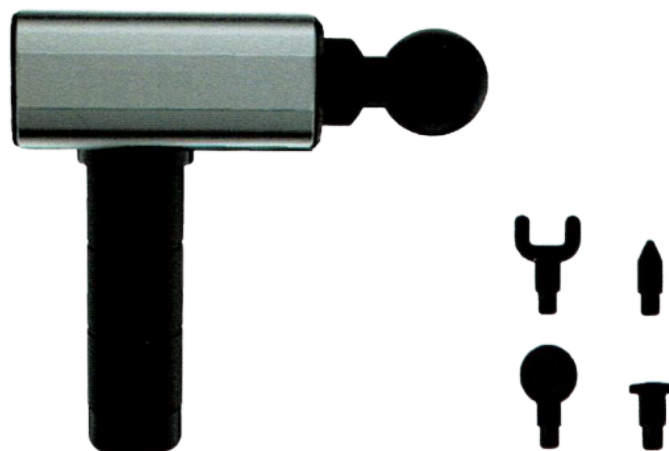

Opakowanie zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska. To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19 / UE dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Dyrektywa WEEE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego). Dyrektywa określa ramy zwrotu i recyklingu zużytego sprzętu, które mają zastosowanie w całej UE. Zapytaj swojego sprzedawcę o aktualne punkty odbioru. Deklaracja zgodności UE

