

MASSAGE GUN EM003

Instrukcja




Nazwa - Masażer powięzi

Model - EM003

Napięcie robocze: 24 V

Moc wyjściowa - 20W

1. przycisk wyjmowania baterii
2. wskaźnik naładowania baterii
3. przełącznik baterii
4. port ładowania
5. wskaźnik mocy; kiedy wyświetlacz cyfrowy po prawej stronie ekranu LCD pokazuje 99; oznacza to, że moc jest pełna, liczba stopniowo zmienia się na 80,90,40, oznacza, że moc spada, gdy liczba na wyświetlaczu wynosi 20, bateria się wyczerpuje i należy ją naładować.
6. Wskaźnik biegów; liczba po lewej stronie ekranu reprezentuje układ jezdny maszyny. Dla biegu 01 częstotliwość impulsów wynosi 1200 obr / min, jeśli dodasz jeden bieg, częstotliwość wzrośnie o 100 obr / min, klasa wyższa to 20, a maksymalna prędkość to 3200 obr / min.
7. Zwiększ lub zmniejsz przełącznik; przycisk + - na ekranie to przełącznik zwiększania i zmniejszania biegów, raz kliknięcie +, bieg plus jeden, raz kliknięcie -, bieg minus jeden, jeśli przytrzymasz przycisk + lub - przez pięć sekund, masażer powięzi zatrzyma się, ponownie kliknij przycisk + i ponownie uruchomi się masażer powięzi.
8. Akumulator: (napięcie 24V)

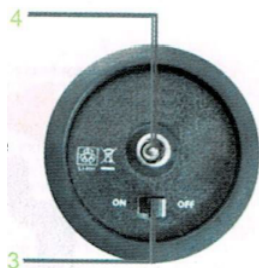

1. zainstaluj, umieść głowicę masującą w maszynie i przekręć o 360 stopni zgodnie z ruchem wskazówek zegara

2. Odinstaluj, obróć głowicę masującą o 360 przeciwnie do ruchu wskazówek zegara

Uwaga: po zainstalowaniu głowicy masującej należy najpierw umieścić głowicę masującą w maszynie, a następnie obrócić o 360 zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby mocno ją wyjąć, obrócić o 360 w lewo, aby poluzować, a następnie wyciągnąć ją z maszyny

Podczas instalowania baterii ustaw wybrzuszenie baterii na przycisk wyjmowania, a następnie włóż baterię



jeśli chcesz wyjąć baterię, przytrzymaj uchwyt baterii, naciśnij przycisk wyjmowania baterii, a następnie wyciągnij ją.

Instrukcja użytkownika:

1. Aby zainstalować baterię, ustaw wybrzuszenie baterii do przycisku wyjmowania, a następnie włóż baterię. Aby wyjąć baterię, przytrzymaj uchwyt baterii i naciśnij przycisk wyjmowania baterii, a następnie wyciągnij.
2. Po ustawieniu przełącznika baterii w pozycji „ON”, wskaźnik naładowania baterii zaświeci się, ekran zaświeci się, dwie cyfry po prawej stronie ekranu oznaczają stan baterii, 99/80/60/40/20 wskazuje moc od pełnej do niskiej.
3. W zależności od potrzeb poszczególnych części masażu należy dobrać odpowiednią głowicę masującą do okrągłego otworu znajdującego się z przodu urządzenia.
4. Kliknij przycisk + u dołu ekranu, a masażer powięzi zacznie działać, liczba w lewym górnym rogu ekranu reprezentuje pozycję biegu, każde kliknięcie + przycisk, zwiększ pozycję biegu o jeden bieg, 01 prędkość to 1200 obr / min, każdy dodatkowy bieg zwiększa prędkość o 100 obr / min, bieg najwyższy to 20 bieg, a prędkość to 3200 obr / min. Po kliknięciu przycisku - maszyna minus jeden bieg. W dowolnej pozycji biegu (01-20) naciśnij i przytrzymaj przycisk + lub - przez pięć sekund, a masażer powięzi przestanie działać.
5. Po zakończeniu masażu wyłącz przełącznik baterii do pozycji „OFF”, a ekran się wyłączy.
6. Aby chronić urządzenie, masażer powięzi przestanie działać automatycznie, jeśli działa nieprzerwanie przez ponad 10 minut lub jeśli siła nacisku jest zbyt duża, włącz go ponownie, jeśli chcesz go nadal używać.

Ostrzeżenia

1. Do ładowania urządzenia należy używać oryginalnej ładowarki. Pełne naładowanie trwa 3-4 godzin,
2. Nie używaj tego urządzenia podczas ładowania.
3. Nie wkładać ani nie dotykać szczeliny między głowicą masującą a osłoną palcami lub innymi przedmiotami podczas użytkowania, aby nie przytrzasnąć.
4. Tego urządzenia nie można samodzielnie rozmontowywać ani modyfikować.
5. Ze względu na dużą moc urządzenia, zaleca się używanie go jednorazowo przez 10-20 minut, aby uniknąć fizycznego dyskomfortu.
6. Nie pozwalaj dziecku na samo uderzenie.
7. jeśli odczuwasz ból lub dyskomfort, natychmiast zaprzestań używania.

Należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem poniższego wniosku.

Pacjenci z osteoporozą, osoby z problemami z sercem z elektronicznym urządzeniem medycznym, kobiety w ciąży, każdy z urazem fizycznym lub innymi powikłaniami medycznymi muszą skonsultować się z lekarzem przed użyciem