




Szczoteczka Soniczna U3 Usmile


Instrukcja Obsługi

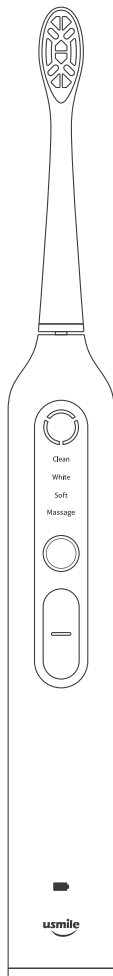

Skrócona instrukcja:


Montaż główki szczoteczki

Znak firmowy Usmile znajduje się na przedniej stronie szczoteczki. Główną szczoteczki należy zamontować w taki sposób, aby znak firmowy znajdował się z przodu. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia produktu lub jego nieprawidłowego działania.

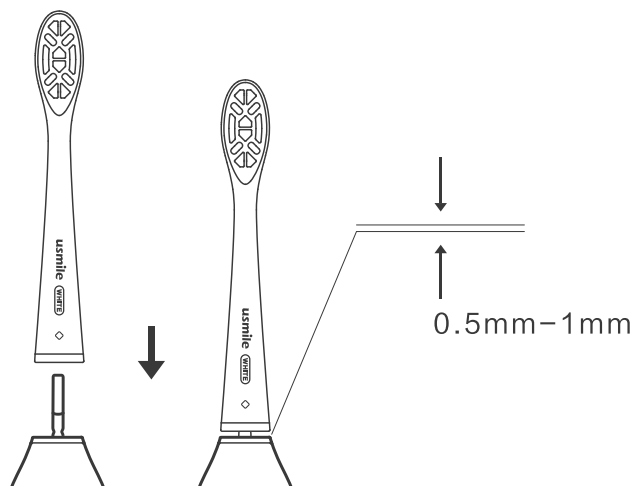


Czyszczenie zębów:


1. Naciśnij przycisk trybu, aby wybrać pożądaný tryb pracy szczotkowania.

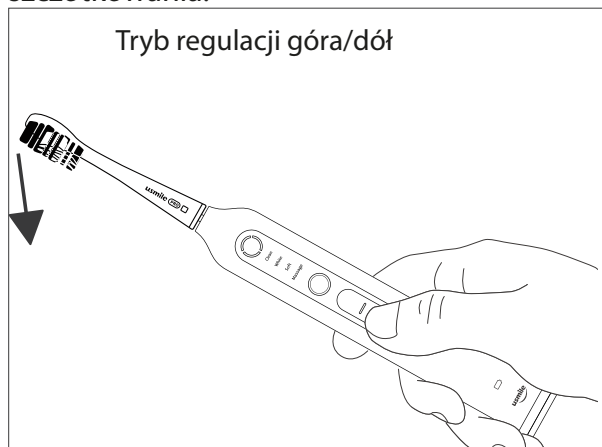


2. Zmocz główkę szczoteczki, wyciśnij pastę do zębów, włóż ją do ust, naciśnij przycisk zasilania i rozpocznij czyszczenie zębów.

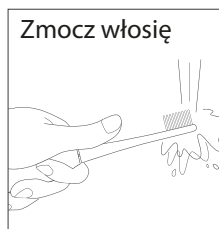

3. W trakcie szczotkowania naciśnij przełącznik funkcji, aby regulować intensywność wibracji.

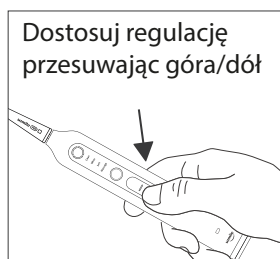

Zalecany czas szczotkowania wynosi 2 minuty. Urządzenie będzie wibrować co 30 sekund w celu przypomnienia o konieczności zmiany strefy jamy ustnej. Po upływie 2 minut szczotkowania, urządzenie zawibruje trzy razy i wyłączy się automatycznie.

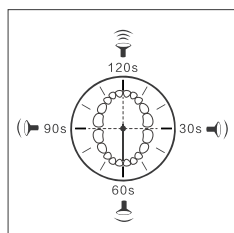

Przypomnienie: Dla osób, które używają urządzenia po raz pierwszy lub mają wrażliwe dziąsła, zaleca się użycia najpierw trybu pielęgnacyjnego, a następnie stopniowego zwiększania intensywności w celu uzyskania lepszego procesu adaptacji dziąseł do trybów urządzenia.

Dziękujemy za wybór elektrycznej szczoteczki sonicznej do zębów marki Usmile.

Przed rozpoczęciem używania szczoteczki należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją, aby maksymalnie wykorzystać jej doskonałe właściwości podczas czyszczenia i pielęgnacji. Instrukcję należy zachować celem wykorzystania jej w przyszłości.

Spis treści:

Instrukcje bezpieczeństwa

Prawidłowe użytkowanie produktu

Stan baterii i ładowanie

Instalowanie specjalnej główki szczoteczki Usmile

Regulacja trybu szczotkowania

Prawidłowe szczotkowanie zębów

Strefa szczotkowania zębów

Czyszczenie i rozmieszczenie

Podróżowanie z Usmile

Ochrona środowiska

Informacje o produkcji


Środki ostrożności

Aby uniknąć ryzyka awarii, porażenia prądem, obrażeń, pożaru, uszkodzenia sprzętu lub mienia, należy przestrzegać następujących środków ostrożności:


1. Te urządzenie ma wbudowany akumulator w związku z czym nie należy go wrzucać do ognia ani wystawiać na działanie promieni słonecznych aby nie doprowadzić do wycieku elektrolitu i przegrzania lub wyładowania akumulatora co może stanowić zagrożenie w postaci wybuchu akumulatora.
2. Nie należy korzystać z urządzenia w trakcie jego ładowania.
3. Nie należy używać tego produktu, gdy port ładowania nie jest prawidłowo osłonięty.
4. Nie należy samemu montować ani naprawiać urządzenia.
5. Nie należy umieszczać kabla do ładowania w wilgotnym środowisku lub w wodzie.
6. Przechowywać produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i niemowląt.

7. Nie należy używać tego produktu do celów innych niż pielęgnacja jamy ustnej.
8. Należy zapobiegać upadkom oraz uderzeniom urządzenia.
9. Nie należy używać urządzenia podczas kąpieli, prysznicu lub kąpieli w gorących źródłach.
10. Jeśli cierpisz na poważną chorobę przyzębia i jesteś w trakcie leczenia lub odczuwasz dyskomfort w jamie ustnej, przed zastosowaniem tego produktu skonsultuj się ze swoim dentystą.
11. Nie należy czyścić tego urządzenia rozcieńczalnikiem do farb, benzenem, alkoholem ani żadnymi innymi środkami chemicznymi.
12. Lekkie krwawienie może wystąpić po rozpoczęciu stosowania tego produktu, ponieważ dziąsła nie są przyzwyczajone do tego rodzaju podrażnienia. Krwawienie powinno ustąpić po okresie tygodnia lub dwóch od momentu rozpoczęcia używania urządzenia. Jeśli po tym czasie krwawienie nadal będzie się utrzymywać może to oznaczać stan zapalny dziąseł. W takim przypadku należy zaprzestać używania urządzenia i skonsultować się ze stomatologiem.
13. W ciągu kilku pierwszych dni używania tego produktu może wystąpić swędzenie jamy ustnej, co jest normalną reakcją powierzchni jamy ustnej i języka, ponieważ nie są one przyzwyczajone do wysokiej częstotliwości wibracji główki szczoteczki. Uczucie to zniknie po kilku dniach ciągłego stosowania.
14. Jeśli produkt jest uszkodzony, zardzewiały, pęknięty itp. należy natychmiast zaprzestać jego używania.


Opis produktu

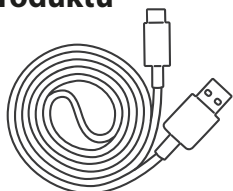

Kabel ładujący x1

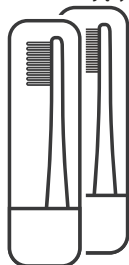

Dedykowana główka szczoteczki x2

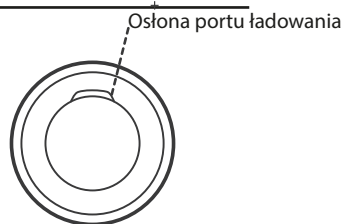

Port ładowania



Osłona przeciwpyłowa wału silnika


Wskaźnik intensywności

Wskaźnik trybu pracy

Przycisk wł/wył

Przyciski funkcyjne
(przeduruchomieniem) regulacja trybu
(po uruchomieniu) regulacja intensywności

Wskaźnik naładowania baterii

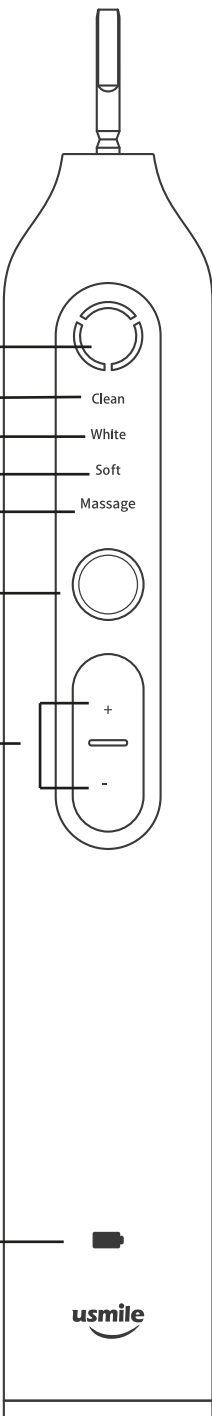

Clean

White

Soft

Massage

+

-


usmile

Prawidłowe korzystanie z urządzenia

Stan baterii i ładowanie

Ten produkt został naładowany przed wydaniem fabrycznym i jest gotowy do użycia. Gdy wskaźnik baterii miga na czerwono, oznacza to, że poziom naładowania baterii jest niski, i należy ją jak najszybciej naładować.

Wskaźnik czerwony/biały
Czerwony: proszę naładować
Biały: w użyciu/ładowanie/pełne
naładowanie

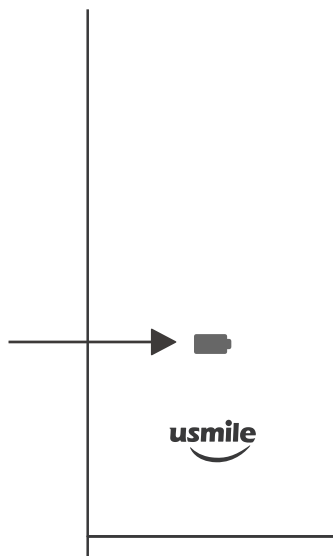


Ten produkt jest ładowany za pomocą standardowego interfejsu ładowania Type-C który charakteryzuje się wysoką kompatybilnością i szybkim ładowaniem. Do ładowania tego produktu można używać adaptera ładowania USB lub nawet banku energii, które do ładowania tego produktu, ale użycie gorszego adaptera ładowania może spowodować uszkodzenie produktu.

Podczas ładowania należy otworzyć pokrywę portu ładowania znajdującą się na spodzie uchwytu i podłączyć kabel ładujący dołączony do tego produktu do adaptera ładowania USB zgodnego ze standardem ładowania. Podczas ładowania produkt należy umieścić w suchym miejscu.




Podczas ładowania wskaźnik baterii będzie migał na biało. Kiedy bateria będzie w pełni naładowana, wskaźnik będzie się świecił na biało. Gdy bateria będzie bliska wyczerpania, wskaźnik będzie świecił na czerwono, a produkt nie będzie mógł działać. W takim wypadku należy produkt jak najszybciej naładować.

Jeśli bateria jest całkowicie wyczerpana, wskaźnik nie będzie migał na biało aż do kilku minut po zakończeniu ładowania. Po całkowitym naładowaniu, przed użyciem urządzenia należy dokręcić pokrywę portu ładowania.

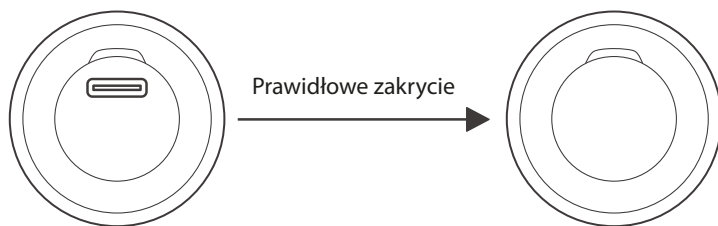


Instalacja specjalnej główki szczoteczki Usmile

Podczas używania tego urządzenia należy używać dedykowanej główki szczoteczki marki Usmile. Jeżeli główka szczoteczki była używana przez kolejne 3 miesiące, jest kłaczkowata lub jej włosie rozwidła się, należy ją wymienić, aby uniknąć uszkodzenia dziąseł i zębów. Podczas instalacji tego produktu należy lekko wsunąć główkę do wałka napędowego. Pomiędzy główką szczoteczki a uchwytem powinna być szczelina 0,5mm-1mm, aby zapewnić normalne wibracje główki szczoteczki.

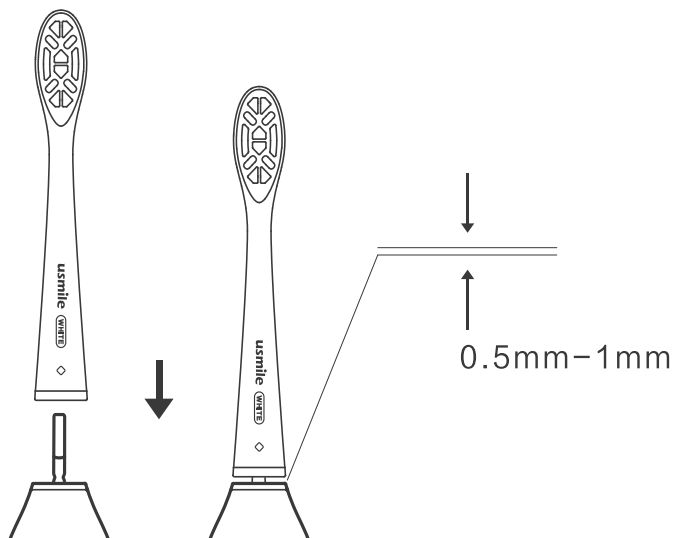

Regulacja trybu pracy szczoteczki

W celu dobrania pożądanego trybu pracy szczoteczki, można w sposób ciągły naciskać przycisk przełącznika.

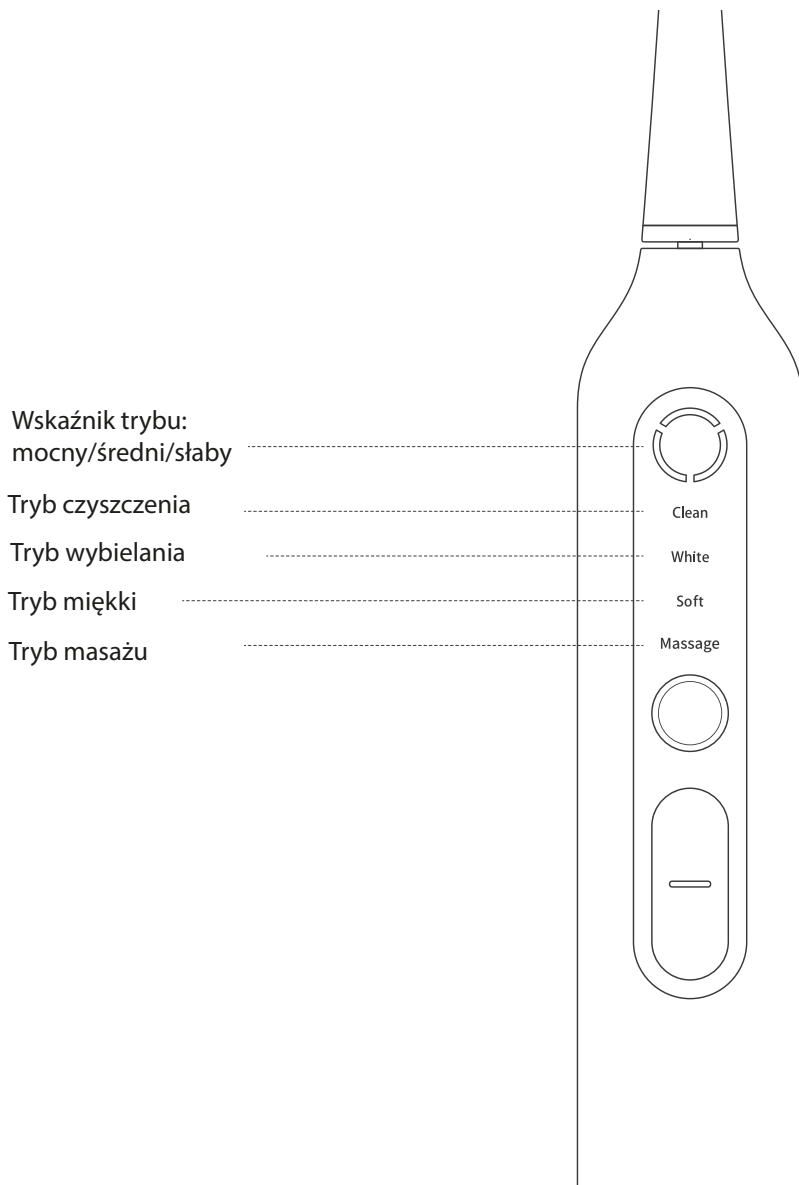

Tryby szczotkowania:

Przed uruchomieniem elektrycznej szczoteczki do zębów należy nacisnąć przycisk przełącznika funkcji aby wybrać tryb.

Tryb czyszczenia: Szczotkuj zęby z normalną siłą przez 2 min, szczoteczka będzie wibrować co 30 sekund, aby przypomnieć o przełączeniu na inną strefę.

Tryb wybielania: Rozjaśnienie powierzchni zębów dzięki polerowaniu i silnemu czyszczeniu z przemienną konwersją częstotliwości pracy, co 30s przypomnienie o zmianie strefy, a po 2min. szczoteczka automatycznie wyłącza się po 2 minutach.

Tryb delikatny: Szczotkuj zęby z mniejszą siłą przez 2 min, co 30 sekund wibruje, przypominając o konieczności przełączenia na inną strefę. Po 2 minutach szczotkowania, urządzenie zawibruje trzykrotnie, aby przypomnieć o zakończeniu szczotkowania, a następnie wyłączy się automatycznie.

Tryb masażu: Szczotkowanie zębów z komfortowym masażem, zmiana częstotliwości przez 2 minuty, co 30s przypomnienie o zmianie strefy. Po 2 minutach szczotkowania, urządzenie zawibruje trzykrotnie, aby przypomnieć o zakończeniu szczotkowania i automatycznie się wyłączy.


Opis trybu szczotkowania:

Trzy poziomy intensywności, słaby/średni/mocny, są ustawione tak, aby zaspokajają różne potrzeby użytkowników w zakresie miękkości, umiarkowanej, mocnej itd. W trakcie szczotkowania naciśnij przycisk przełącznika funkcji aby dostosować intensywność drgań.

Prawidłowe szczotkowanie zębów:


Podczas używania sonicznej szczoteczki elektrycznej usmie do szczotkowania zębów nie naciskaj mocno główki, aby utrzymać włosie w kontakcie z powierzchnią zęba. Nie należy naciskać mocno główki szczoteczki, aby włosie miało kontakt z powierzchnią zęba, a następnie przesuwaj powoli w bok aby oczyścić pozostałe części jamy ustnej.

Zaleca się, aby w trakcie szczotkowania zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni zębów utrzymać odpowiedni kąt nachylenia w celu uzyskania lepszych rezultatów czyszczenia (patrz rysunek poniżej).

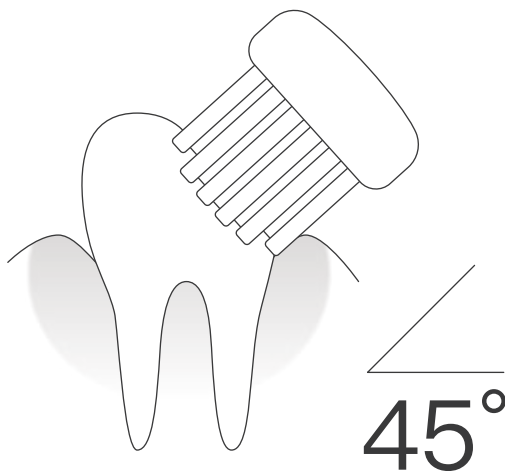


Rozpoczęcie szczotkowania

Zaleca się podzielenie zębów na cztery strefy, i szczotkowanie każdej strefy przez 30 sekund. Po uruchomieniu szczoteczki będzie ona zmieniać częstotliwość pracy aby informować o zmianie strony szczotkowania.

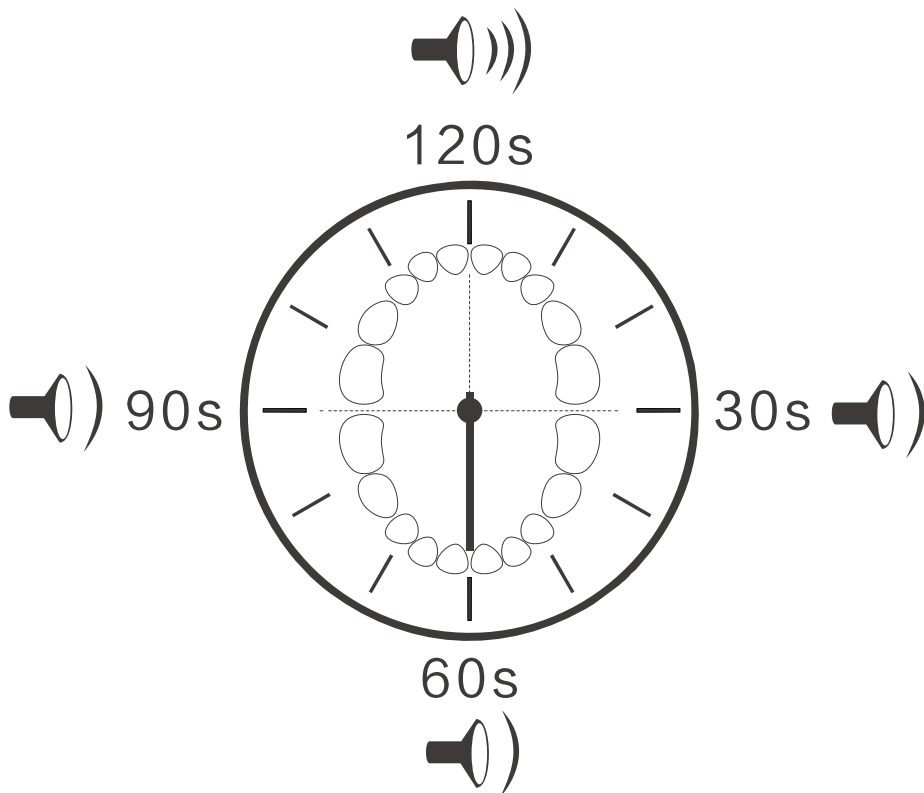


Czyszczenie i przechowywanie

Po zakończeniu szczotkowania należy nacisnąć przycisk wyłącznika na uchwycie aby wyłączyć urządzenie. Wyczyść główkę szczoteczki oraz jej uchwyt wodą, a następnie osusz za pomocą ręcznika i ustaw pionowo na suchej powierzchni lub włóż do kubka.

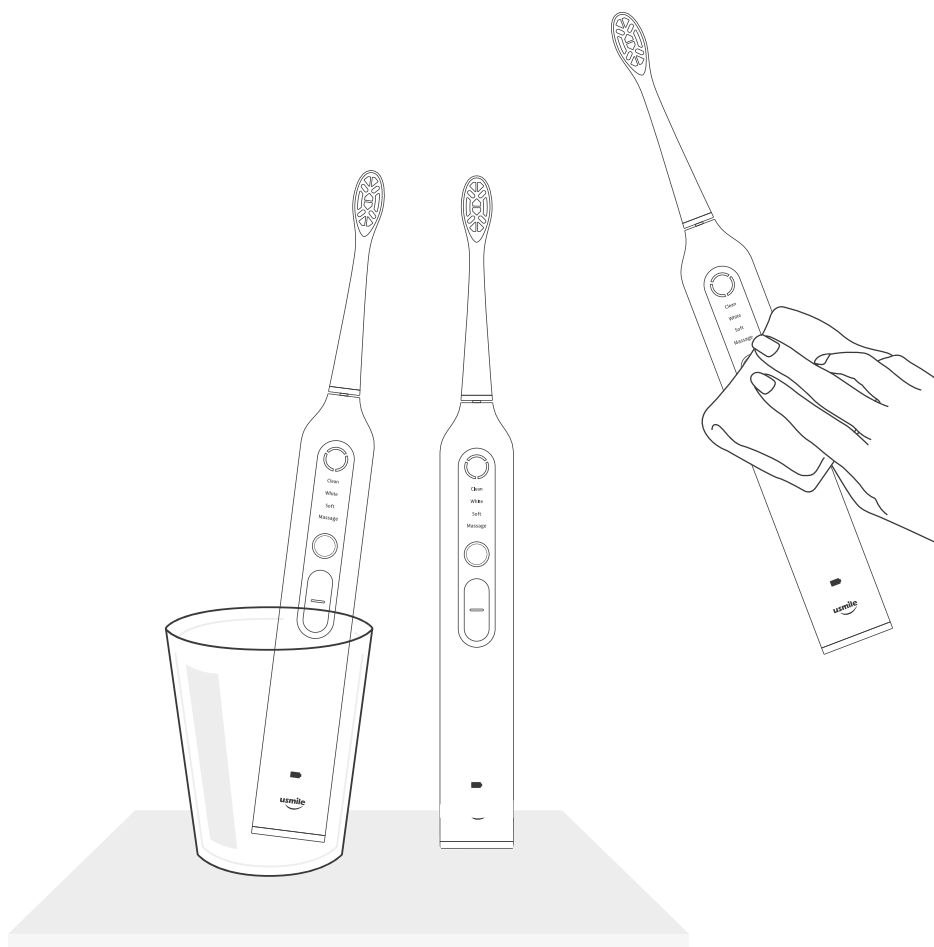

Podróżowanie ze szczoteczką Usmile

Przed zabraniem urządzenia należy zdjąć główkę szczoteczki i umieścić ją w dołączonej do urządzenia tubie celem zabezpieczenia przed zakurzeniem. Urządzenie należy umieścić w bagażu w taki sposób, aby żaden inny przedmiot nie uruchomił urządzenia.

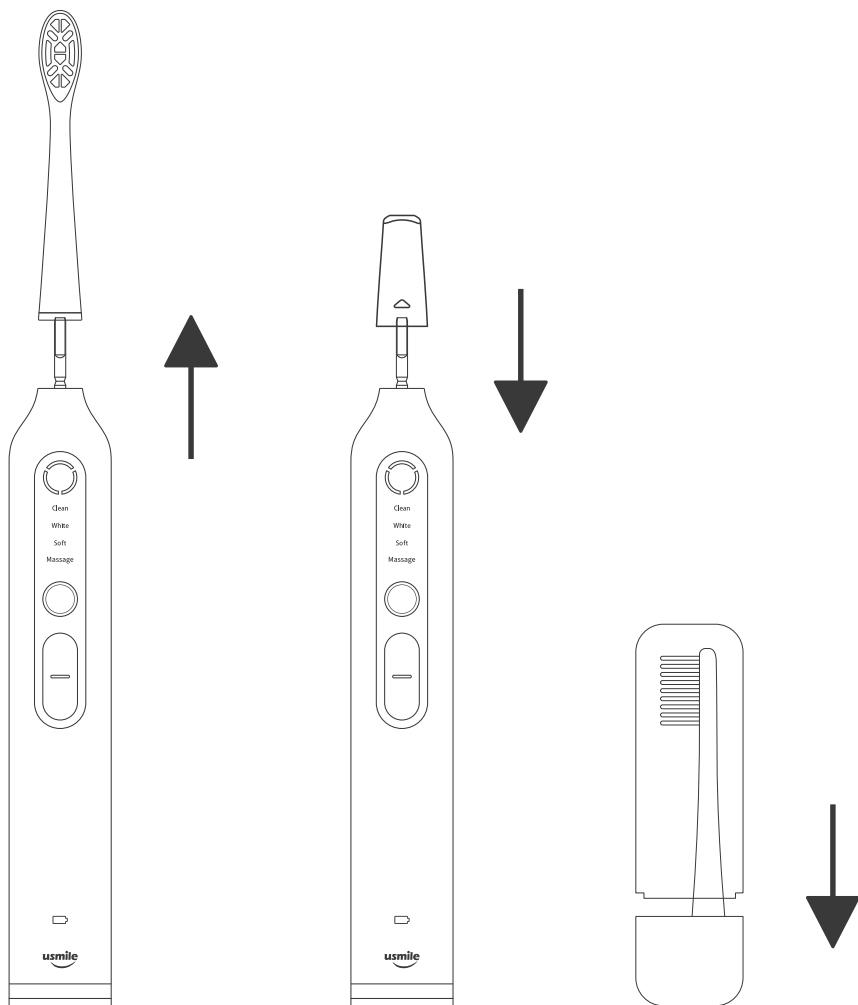

Ochrona środowiska

Elektryczna szczoteczka soniczna do zębów marki Usmile posiada wbudowaną baterię litową, której nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. W celu utylizacji należy przekazać ją do lokalnego punktu recyklingu lub odesłać do Działu Obsługi Posprzedażowej Usmile.

Informacje o produkcie

Produkt: elektryczna szczoteczka soniczna do zębów

Model: Usmile U3

Napięcie znamionowe: DC = 3,6V

Moc znamionowa: 1,2W

Producent: Guangzhou Haoxingwan Technology Co., Ltd.

Adres: Room718, No.9 Linhe West Road, Tianhe District,
Guangzhou

Wyprodukowano w Chinach

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

usmile[®]

The logo for 'usmile' features the brand name in a bold, lowercase, sans-serif font. A registered trademark symbol (®) is positioned at the top right of the word. Below the text is a simple, black, upward-curving arc that resembles a smile.