

Skala składu ciała Mi2

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Instrukcja dotycząca skali składu ciała Xiaomi Mi PL v1.0 - Strona 1 Niniejszy dokument i cała jego zawartość są własnością firmy WayteQ Europe Kft. Korzystanie z WayteQ Europe Kft. Bez pisemnej zgody jest surowo zabronione.

Dziękujemy za wybranie produktu Xiaomi!

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi przed użyciem, abyś mógł łatwo i łatwo korzystać z urządzenia.

W celu uzyskania lepszej obsługi zawartość instrukcji obsługi może ulec zmianie! Funkcje i cechy urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia! Jeśli zauważysz rozbieżność, odwiedź naszą witrynę internetową, aby uzyskać najnowsze informacje!

OSTRZEŻENIA BEZPIECZEŃSTWA

DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z urządzenia należy zawsze przestrzegać poniższych instrukcji. Może to zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem i innych wypadków.

- Urządzenie nadaje się tylko do użytku w pomieszczeniach, optymalna temperatura to ok. 25 °C
- Nie używaj urządzenia mokrymi stopami lub na mokrej powierzchni, ponieważ może to doprowadzić do wypadku.
- Aby uniknąć ryzyka upadku, nigdy nie stawaj na krawędzi lub krawędzi wagi. • Nie używaj urządzenia w wilgotnym środowisku ani nie zanurzaj go w wodzie. • Po wyczerpaniu baterii natychmiast wyjmij je z urządzenia, aby zapobiec korozji i wyciekowi baterii.
- Używanie wagi nie jest zalecane dla osób z rozrusznikiem serca lub innym implantem. • Zmierzone dane mogą się różnić w przypadku kobiet w ciąży, sportowców i osób w szczególnych sytuacjach.
- Maksymalna mierzalna waga i maksymalna nośność urządzenia to 150 kg.
- Wagę stawiać wyłącznie na płaskiej powierzchni!
- Urządzenie nadaje się wyłącznie do użytku domowego.
- Urządzenie jest czułym urządzeniem technicznym, należy je chronić przed upadkami i uderzeniami.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie ekstremalnie wysokich lub niskich temperatur i bezpośredniego światła słonecznego.
- Urządzenie należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci
- Urządzenie to nie jest zabawką! We wszystkich przypadkach dzieci mogą go używać tylko pod nadzorem rodziców! Przechowuj urządzenie i jego akcesoria oraz części opakowania poza zasięgiem małych dzieci, ponieważ małe części mogą spowodować uduszenie lub inne obrażenia!
- Przechowuj urządzenie w chłodnym, suchym i wolnym od kurzu miejscu.
- Urządzenie może być demontowane tylko przez upoważnioną osobę (serwis marki). • W przypadku zamoczenia natychmiast wyłącz urządzenie. Nie rozbierać do suszenia, nie używać urządzenia grzewczo-suszającego, np. suszarka do włosów, kuchenka mikrofalowa itp. • W przypadku pytań prosimy o kontakt z serwisem.

- Nie używaj urządzenia w ekstremalnych warunkach temperatury (poniżej 0°C i +40°C powyżej), ponieważ może to skrócić żywotność urządzenia i uszkodzić baterię. • Nie rzucaj, nie uderzaj ani nie blokuj urządzenia, ponieważ może to uszkodzić płytę główną urządzenia.

Czyszczenie wagi

- Aby usunąć odciski palców i inne zabrudzenia, użyj miękkiej, gładkiej szmatki, takiej jak szmatka ściereczka do czyszczenia obiektywu aparatu.
- Nie używaj środków czyszczących zawierających chemikalia lub substancje powodujące korozję, ponieważ może to spowodować uszkodzenie osłony wagi.
- Obudowę urządzenia można czyścić wilgotną szmatką.

Instrukcja dotycząca skali składu ciała Xiaomi Mi PL v1.0 - Strona 2
Dokument i cała jego zawartość są własnością firmy WayteQ Europe Kft. Korzystanie z WayteQ Europe Kft. Bez pisemnej zgody jest surowo zabronione.

Model: XMTZC05HM

Wymiary: 300 x 300 x 20 mm

Waga: 1,7 kg.

Zakres pomiarowy: 100 g. ~ 150 kg.

Jednostka: kg. / funt

Dokładność pomiaru: 0,1 kb / funt

Pokrywa: szkło hartowane + tworzywo

ABS Połączenie bezprzewodowe: Bluetooth 5.0

Zakres pracy: 0°C ~ 40°C

Zasilanie: 4 x baterie AAA

Zastosowanie: Mi Fit

Zgodność: Android 4.4+ / iOS 9.0 +

* Wszystkie dane są mierzone w wewnętrznych warunkach laboratoryjnych i mogą różnić się w rzeczywistości z powodu różnych wzorców użytkowania i zmian w środowisku.

ZAWARTOŚĆ

- PUDEŁKA Skala składu ciała Mi 2 Wagi
- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna

składu ciała Xiaomi Mi PL v1.0 - Strona 3
Niniejszy dokument i cała jego zawartość są własnością firmy WayteQ Europe Kft. Korzystanie z WayteQ Europe Kft. Bez pisemnej zgody jest surowo zabronione.

Przetwarzanie odpadów Przetwarzanie odpadów

jest objęte Dyrektywą Europejską 2002/96 / WE.

Odpady elektroniczne należy utylizować oddzielnie od odpadów domowych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z władzami lokalnymi lub organami ochrony środowiska.

Producent:

Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.

Adres: 10F-B4, Budynek B, Międzynarodowy Park Innowacji, 1 Keyuan Weiyi Road, Laoshan, Qingdao, prowincja Shandong, Chiny

Deklaracja zgodności (streszczenie)

Sprzedawca oświadcza, że urządzenie jest zgodny z przeznaczeniem i jest dostarczany zgodnie z przepisami wraz z naklejką produktu, kartą gwarancyjną i instrukcją obsługi w języku węgierskim. Na podstawie deklaracji opublikowanej przez producenta produkt jest wprowadzany do obrotu ze znakiem zgodności CE zgodnie z § 5 ust. 1 dekrety IKIM 79/1997 (XXII.31.).

jakości


Certyfikat Sprzedawca oświadcza, że urządzenie jest zgodne z 2/1984. (III.10.) IpM-BKM. Jest zgodny z charakterystyką techniczną podaną w opisie zgodnie z dekretem nr

© 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone dla WayteQ Europe Kft.



WKŁADANIE BATERII

Otwórz pokrywę baterii z tyłu urządzenia, a następnie włóż 4. Baterie AAA zgodnie z ilustracją, a następnie zamknij pokrywę baterii.

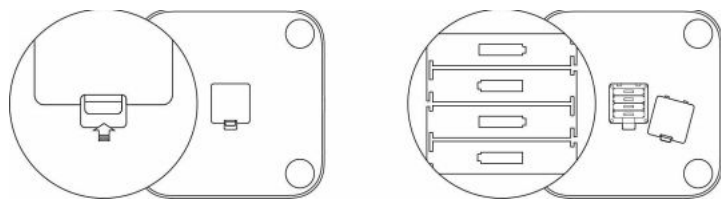

Instrukcja dotycząca skali składu ciała Xiaomi Mi PL v1.0 - Strona 4
Niniejszy dokument i cała jego zawartość są własnością firmy WayteQ Europe Kft. Korzystanie z WayteQ Europe Kft. Bez pisemnej zgody jest surowo zabronione.

POBIERZ APLIKACJĘ MOBILNĄ



Mi Fit



POŁĄCZ Z WAGA

