

## inFace Blackhead Remover



### MS7000 najważniejsze informacje:

Dysza ssąca do wągrów

Specjalny relaksujący sposób ssania

Nie tylko do zaskórników ale też do oczyszczania porów

Model:	MS7000
Rozmiar:	183 mm * 35 mm
Waga:	135g
Pojemność baterii:	400mAh
Napięcie ładowania:	5v
Prąd ładowania:	300mA
Długość ładowania:	Okolo 2h
Prąd czuwania:	40 uA
Temperatura pracy:	0C-40C
Materiał:	Przezroczysty, Matowy UV,
Siła ssania:	Maksymalnie 63kpa

## inFace Blackhead Remover



### Działanie:

1. Urządzenie ma dwa tryby do wyboru. Tryb 1 (niebieskie światło włączone) to ciągły tryb zasysania; tryb 2 (światło pomarańczowe włączone) to tryb zwalniania ssania.
2. W stanie wyłączonym kliknij dwukrotnie przycisk dotykowy, aby włączyć urządzenie.
3. Gdy urządzenie jest włączone naciśnij długo przycisk dotykowy, aby przełączyć na tryb 2 - tryb zwalniania ssania.
4. Gdy urządzenie jest włączone, kliknij raz przycisk dotykowy, aby przełączyć siłę ssania (LOW / MID / HIGH)
5. Kliknij dwukrotnie przycisk dotykowy, aby wyłączyć urządzenie.

### Metody użycia:

#### Wskazówki przed użyciem

1. Niebieskie światło włączone (tryb ciągłego odsysania: ten tryb ma silną siłę ssącą, odpowiedni dla rodzajów skóry z z grubszym naskórkiem i rozszerzonymi porami
2. Pomarańczowe światło włączone (tryb odsysania/zwalniania). Odsysanie na tym trybie jest mniej bolesne, nadaje się do typów skóry o cienkim naskórku i wrażliwej skórze. Należy dobrać odpowiednią metodę do własnej skóry.

Po umyciu twarzy należy przykryć ją gorącym ręcznikiem przez około 3-5 min aby rozluźnić pory.

W celu uzyskania lepszych efektów zaleca się zwilżenie wacika tonikiem, a następnie nałożenie wacika na nos i zdjęcie go po 8-10 minutach.

### Drugi etap:

1. Wybierz w razie potrzeby tryb ciągłego ssania lub tryb zwalniania ssania, przetestuj siłę ssania na dłoni, a następnie wybierz odpowiedni poziom.


2. Przesuwaj Urządzenie prawidłowo, nie pozostając w tym samym obszarze dłużej niż 2 sekundy

Po oczyszczeniu zaskórników należy wyczyścić dyszę ssącą mokrymi chusteczkami lub wodą.

### Trzeci etap:

Aby uzyskać lepsze efekty, zaleca się zwilżyć wacik tonikiem, a następnie nałożyć wacik na nos i usunąć go po 8-10 minutach.

Jeśli na twarzy jest nadmiar toniku należy wmasować pozostałość aż się wchłonie.

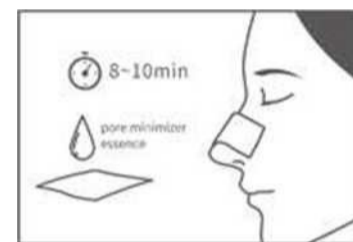

- Nie używaj tego produktu w środowisku o wysokiej temperaturze.
- Jeśli produkt jest zdeformowany lub uszkodzony, przestań go używać, aby uniknąć wypadków.
- Tego produktu nie należy stosować do gałek ocznych, powiek, szyi, żył. w przeciwnym razie może spowodować uszkodzenie skóry. Nie należy używać produktu do skóry, która została poddana zabiegom kosmetycznym, w tym chirurgii plastycznej i plastyki nosa; nie należy używać produktu dla skóry zranionej i bliznowatej. Przed użyciem należy osuszyć dłonie, aby zapobiec dostaniu się wody lub innych płynów do środka urządzenia. Jeżeli odczuwany jest ból podczas używania, należy natychmiast przestać używać urządzenia. Po użyciu oczyścić produkt. Urządzenie należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie używać produktu w pobliżu łatwopalnego materiału (alkohol, lakier do paznokci, spray itp.).
- Produkt nie jest wodoodporny, nie przechowuj go w łazience lub innych mokrych miejscach. Nie zanurzaj go w wodzie ani nie myj bezpośrednio pod kranem. Alergikom, osobom z chorobami skóry lub mającym ciężkie oparzenia słoneczne czy obrzęki skóry nie zaleca się stosowania produktu.

Opakowanie zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska. To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19 / UE dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Dyrektywa WEEE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego). Dyrektywa określa ramy zwrotu i recyklingu zużytego sprzętu, które mają zastosowanie w całej UE. Zapytaj swojego sprzedawcę o aktualne punkty odbioru. Deklaracja zgodności UE

