



inFace Visual Blackhead Remover INSTRUKCJA

Spis treści

- Funkcje Produktu 12
- Środki ostrożności 12
- Ostrzeżenie FCC 13
- Szczegóły produktu 14
- Parametry produktu 15
- Instrukcje 15
- Operacje 16
- Instrukcje ładowania 18
- Czyszczenie i konserwacja 18
- Pytania i odpowiedzi 18
- Ochrona środowiska 19
- Przetwarzanie odpadów 20
- Ochrona posprzedażna i serwis 20
- Certyfikacja 21
- Karta Gwarancyjna 21
- Informacje kontaktowe po sprzedaży 21

*Proszę uważnie przeczytać tę instrukcję przed użyciem

produkt i przechowuj go we właściwy sposób.

Zapraszamy do korzystania z inFace
inFace Visual Blackhead Remover
Niezależnie opracowany i wyprodukowany przez firmę Shenzhen inFace Technology Co., Ltd., która jest powiązana z Shenzhen Migoosmart Co., Ltd.. Od momentu założenia firmy została zaprojektowana zgodnie z podstawowymi koncepcjami praktyczności, funkcjonalności i bezpieczeństwa, mający na celu tworzenie produktów opartych na technologii i intelektualnych oraz dążenie do odkrywania i wprowadzania innowacji.

Wizualny środek do usuwania zaskórników inFace
IFunkcje Produktu |
Usuwanie zaskórników | Złuszczający
Czyszczenie porów | Niebieskie światło przeciwzapalne

Środki ostrożności
Przeczytaj i postępuj zgodnie z następującymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa:
1. Ten produkt nie jest wodoodporny, proszę nie moczyc produktu w żadnej formie cieczy.
2. Trzymaj produkt z dala od wanny, brodzika, umywalki grzechu lub innych naczyń zawierających wodę oraz utrzymuj produkt i zasilacz w stanie suchym.
3. Wysusz ręce, aby zapobiec przedostaniu się wody lub innych płynów do produktu i uszkodzeniu produktu.
4. Nie nadużywaj go na tym samym obszarze twarzy, ponieważ może spowodować zaczerwienienie, zaczerwienienie i obrzęk skóry. Zaleca się, aby czas przetrzymywania w tym samym obszarze w okresie: stosowanie nie powinno przekraczać 3 sekund, a czas każdego zabiegu nie powinien przekraczać 5 minut.
5. Nie używaj na delikatnych obszarach skóry, takich jak podbródek, kąćki ust i wokół oczu.
6. Nie używaj tego produktu na skórze z otwartymi ranami, trądzikiem lub pryszciami.
7. Nie używaj go na skaleczenia, obszary, które przeszły operację plastyczną, stany zapalne skóry, swędzenie i zaczerwienienie.
8. Jeśli źle się poczujesz podczas użytkowania, natychmiast przestań go używać.
9. Po długim czasie ciągłego użytkowania, jeśli ciało wydaje się nagrzewać, nie jest to awaria produktu, proszę mieć pewność, że go użyjesz.
10. Po użyciu produktu skóra może wydawać się czerwona Stan, który jest normalnym zjawiskiem, zazwyczaj w ciągu 1 godziny zaczerwienienie zniknie.
II. Nie patrz bezpośrednio na działające światło LED z bliskiej odległości.
12. Nie pozwalaj dzieciom korzystać z tego produktu, umieść ten produkt poza zasięgiem dzieci.


13. Jeśli produkt jest uszkodzony, przestań go używać.
14. Jeśli masz jakiegokolwiek problemy ze skórą, skonsultuj się z lekarzem przed użyciem tego produktu.
15. Podczas konserwacji użytkownika należy zachować środki ostrożności, należy podać odpowiednie szczegóły.
16. Instrukcje zawierają treść następujących elementów:
- z tego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
-dzieci nie mogą bawić się urządzeniem
-czyszczenie i konserwacja użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru

Ostrzeżenie FCC
Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do obsługi sprzętu.
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC.
Operacja jest z zastrzeżeniem następujących dwóch warunków:
(1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i
(2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie. Uwaga: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji mieszkaniowej. To urządzenie generuje zastosowania i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można określić, wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do próby usunięcia zakłóceń za pomocą co najmniej jednego z następujących środków:
-Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej.
-Zwiększ odległość między sprzętem a odbiornikami.
-Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie od tego, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.
Urządzenie zostało ocenione pod kątem ogólnej ekspozycji na fale radiowe

Urządzenie może być używane bez ograniczeń w warunkach ekspozycji przenośnej.

Szczegóły Produktu

- Otwór pudełko, a zobaczysz
- 1. Wizualny środek do usuwania zaskórników inFace x1
- 2. Dysza ssąca x4
- 3. Silikonowy pierścień O x2
- 4. Siatka przeciwpływa x2
- 5. Kabel ładujący USB x1
- 6. Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna x1 (jeśli brakuje jednego lub więcej z powyższych akcesoriów, proszę skontaktuj się z naszym posprzedażowym centrum obsługi klienta.)

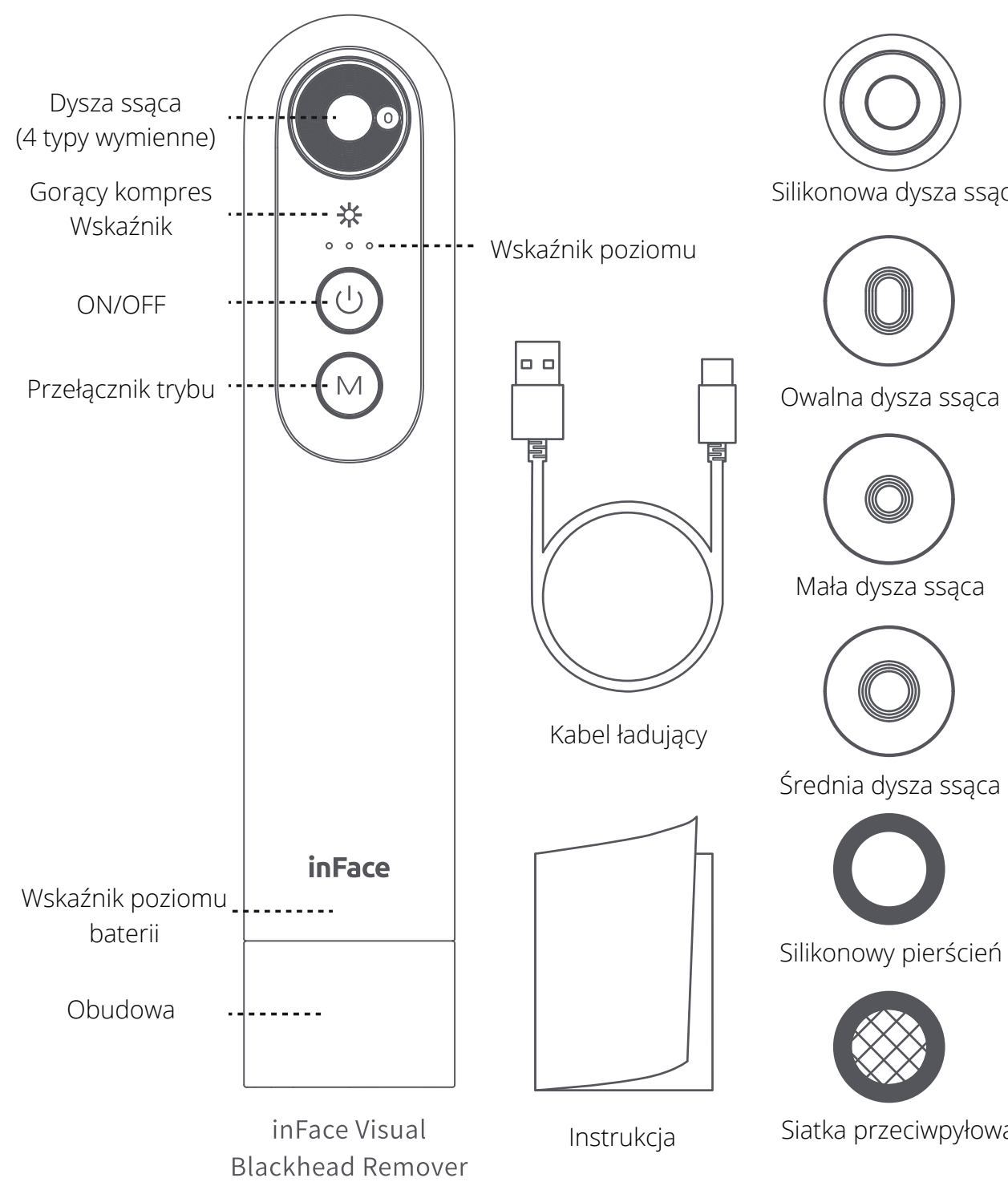

Uwaga: Zdjęcia produktów i opis odpowiednich cech przedstawionych w tej instrukcji, a także objaśnienia niektórych rzeczowników, mogą być używane tylko jako odniesienie, użytkownicy powinni opierać się na rzeczywistym obiekcie. Mając na uwadze konsekwentną politykę ciągłego ulepszenia produktów inFace, zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji produktów bez wcześniejszego powiadomienia.

Parametry produktu

Nazwa produktu: **Wizualny środek do usuwania zaskórników inFace**
Model: CF-05E Pojemność baterii: 800 mAh
Napięcie wejściowe: 5 V = Moc wejściowa: 5 W
Napięcie znamionowe: 3.7 V = Moc znamionowa: 6 W
Prąd czuwania: około 30uA Tryb ładowania: USB DC 5V
Czas ładowania: około 2 godzin Prąd ładowania: 600mA
Rozmiar produktu: 160*31.5*31.5mm Waga netto: około 120g
Ciągły czas pracy: około 60 minut
Zakres temperatur pracy: 0°C~40°C

Instrukcje

1. Długo naciśnij przycisk "ON/OFF (przełącznik funkcji)" przez 1.5 sekundy, aby włączyć urządzenie. Biała dioda LED poziomu 1 miga, wskazując stan gotowości;
2. Po włączeniu urządzenia krótko naciśnij przycisk "Mode", aby przełączyć się między "gorącym kompresem-niebieskim czyszczeniem światła", a odpowiednia lampka kontrolna jest zawsze włączona;
3. Pracuj w każdym trybie przez 5 minut, aby przejść do trybu gotowości. Jeśli w ciągu 90 sekund w trybie gotowości nie zostanie wykonana żadna operacja, urządzenie wyłączy się automatycznie;
4. W dowolnym stanie pracy naciśnij i przytrzymaj przycisk "ON/OFF (przełącznik funkcji)" przez 1.5 sekundy, urządzenie wyłączy się.
5. W "trybie czyszczenia" krótko naciśnij przycisk "ON/OFF (przełącznik funkcji)", aby przełączyć się między "poziom 1 - poziom 2 - poziom 3 - tryb gotowości", a odpowiednie lampki kontrolne są włączone;
6. W "trybie gorącego kompresu" część urządzenia z gorącym kompresem jest podgrzewana do 40i2 stopni i utrzymywana w stałej temperaturze, a kontrolka "trybu gorącego kompresu" jest zawsze włączona;
7. W "trybie niebieskiego światła" świeci niebieska dioda LED na górze urządzenia;
8. Gdy napięcie baterii jest niższe niż 3,4 V, czerwony wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii miga przez 90 sekund i automatycznie się wyłącza;
9. Podczas ładowania trzy białe wskaźniki (LED1/LED2/LED3) włączają się kolejno, a trzy białe wskaźniki (LED1/LED2/LED3) są zawsze włączone po pełnym naładowaniu;
10. Nie używaj podczas ładowania, kluczowa operacja jest nieprawidłowa.

{Kroki użytkownika}

1. Pobierz i zainstaluj aplikację (patrz kroki pobierania i instalowania aplikacji, aby uzyskać szczegółowe informacje);
2. Połącz urządzenie z aplikacją (szczegóły w opisie funkcji aplikacji);
3. Oczyszcz twarz przed użyciem, nałóż gorący ręcznik lub użyj parowca do twarzy, aby podgrzać twarz przez pięć minut, aby pomóc otworzyć pory, a następnie nałóż maskę nosową na zaskórnik, włącz urządzenie - funkcja gorącego kompresu, aby przyspieszyć zmiękczenie zaskórników i ułatwienie im odsysania zaskórników;
4. Wybierz ssawkę odpowiednią do swoich potrzeb, zainstaluj ją na górze urządzenia i przed użyciem przetestuj siłę ssania na dłoni lub przedramieniu;
5. Podczas używania możesz wybrać odpowiedni poziom zależności od stanu skóry, naciskając przycisk "ON/OFF (przełącznik funkcji)";
6. Podczas używania upewnij się, że głowica ssąca znajduje się blisko skóry i nie powinno być żadnych szczelin, w przeciwnym razie nie powstanie podciśnienie próżniowe, a zaskórnik nie zostaną skutecznie wysrane;
7. Poruszaj się podczas korzystania z urządzenia, a czas przetrzymywania w tym samym obszarze podczas użytkowania nie powinien przekraczać 3 sekund, a każdy czas zabiegu nie powinien przekraczać 5 minut.
8. Po oczyszczeniu możesz przełączyć się na "tryb niebieskiego światła" w celu pielęgnacji skóry;
9. Po użyciu naciśnij i przytrzymaj przycisk "ON/OFF (przełącznik funkcji)" przez 1.5 sekundy, aby wyłączyć urządzenie;
10. Oczyszczanie twarzy zalecane raz w tygodniu, konkretna częstotliwość stosowania musi być dostosowana do własnych warunków skóry.

{Pobierz i zainstaluj aplikację}




Użyj przeglądarki telefonu komórkowego, aby zeskanować I -- kod QR w instrukcji, a następnie kliknij "I" E pobierz i zainstaluj (jeśli używasz wechat do -l skanuj, ręcznie przeskocz do przeglądarki, aby -OPGH).

{Opis funkcji aplikacji}

Połączenie z kamerą urządzenia za pośrednictwem aplikacji sprawia, że czyszczenie porów podczas użytkowania jest bardziej intuicyjne i wygodne.
1. Włącz urządzenie i wejdź w stan gotowości, a następnie kliknij stroną ustawień telefonu, aby wybrać nazwę WIFI odpowiadającą urządzeniu (np. inFace-xxxx) i połącz się.
2.Otwórz aplikację "UDLU" i przejdź do strony głównej. Jeśli urządzenie nie jest podłączone, aplikacja poprosi o instrukcję obsługi.
3. Po kliknięciu „Włącz” możesz zobaczyć obraz przesyłany przez kamerę urządzenia w interfejsie aplikacji.



4. Podczas używania pozycję roboczą miernika zaskórników można odpowiednio dostosować do stanu wyświetlanej skóry twarzy.
5. Po kliknięciu „Wideo” obrazy przesyłane przez kamerę urządzenia można zapisać w telefonie komórkowym jako wideo.
6. Po kliknięciu „Zdjęcie” obraz przesyłany przez kamerę urządzenia można zapisać w telefonie komórkowym jako zdjęcie.

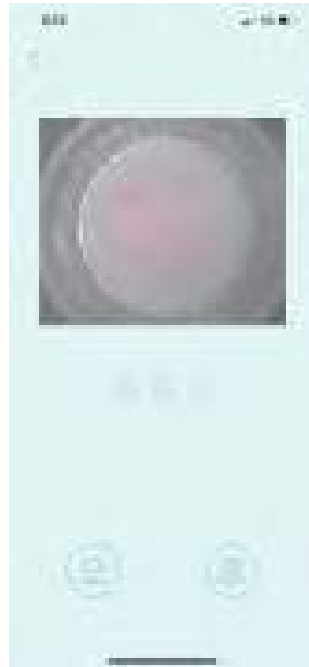

7. Po użyciu wystarczy zamknąć aplikację w tle

-Instrukcje ładowania

Przed pierwszym użyciem w pełni naładuj urządzenie.
1. Użyj standardowego kwalifikowanego adaptera DC5V/1A do ładowania.
2. Podczas procesu ładowania migają trzy wskaźniki poziomu; z kolei.
3. Po pełnym naładowaniu trzy wskaźniki poziomu są zawsze włączone.
4. Gdy poziom naładowania baterii jest niski, czerwony wskaźnik będzie powoli migał przez 90 sekund. Użyj go po pełnym naładowaniu.
Podłączenie do zasilania, jeśli ładowanie nie zostało rozpoczęte
po 10 sekundach sprawdź, czy kabel typu C jest źle podłączony lub czy zasilanie jest normalne.
-Czyszczenie i konserwacja |

1. Podczas czyszczenia upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i nie można go myć wodą, aby uniknąć porażenia prądem.
2. Podczas czyszczenia ssawki należy wyjąć ssawkę z urządzenia i opłukać ją ciepłą wodą.
3. Urządzenie nie jest wodoodporne, po każdym użyciu można użyć mokrej chusteczki lub mokrej szmatki wytrzeć do czysta kadłub, zabronić używania żrącego roztworu wytrzeć lub umyć wodą.
4. Obiektym aparatu urządzenia z wacikiem do czyszczenia, nie dotykaj obiektu twardego przedmiotem, aby uniknąć zarysowania obiektu.
5. Proszę przechowywać urządzenie w normalnej suszarni.
6. Nie uderzaj mocno, nie uderzaj ani nie upuszczaj urządzenia.
7. Proszę nie demontować ani nie naprawiać tego urządzenia samodzielnie. W sprawie konserwacji prosimy o kontakt z serwisem posprzedażowym urządzenia.
P: Dlaczego nie można usunąć zaskórników? O: Q) W normalnych przypadkach pory są zamknięte. Przed użyciem urządzenia zaleca się nałożenie gorącego kompresu lub użycie parera do twarzy w celu otwarcia porów, a następnie użycie plynu eksportującego zaskórnik, aby zmiękczyć i po prostu wyeksportować zaskórnik. Q) Użyj odpowiedniej ssawki i wybierz odpowiedni poziom ssania w zależności od stanu skóry.

P: Dlaczego może powstać zaczerwienienie?
A: (D Ze względu na siłę ssania podciśnienia, skóra zostanie lekko wyplukana po odessaniu, co jest normalne, i zniknie w ciągu 1 godziny. @ Zaleca się, aby nie trzymać urządzenia na jednym obszarze skóry dłużej niż 3 s podczas używania urządzenia. Okład lodowy można wykonać po pracy urządzenia lub dodatkowo można użyć plynu konwergującego pory.

P: Dlaczego jest bolesny podczas użytkowania?
A: @ Proszę zastosować niższy poziom ssania; Q) Proszę wybrać mniejszą ssawkę; @ Podczas pracy poruszaj się i nie trzymaj urządzenia na jednej części dłużej niż 3 sekundy; C4) Czas każdego zabiegu nie powinien przekraczać 5 minut.
P: Jak często go używasz?

O: Raz w tygodniu dla skóry wrażliwej i suchej, dwa razy w tygodniu dla skóry tłustej i mieszanej.

P: Jak wybrać odpowiedni poziom?
Odp.: Przed użyciem urządzenia sprawdź siłę ssania dłonią lub przedramieniem, następnie dla twarzy zaleca się rozpocząć test od „Poziomu 1”, a następnie stopniowo dostosowywać go do odpowiedniego poziomu.

P: Urządzenie nie można podłączyć aplikacji?
Odp.: (D Upewnij się, że urządzenie do odkurzania zaskórników jest włączone. @ WIFI w ustawieniach telefonu, a następnie połącz się z odpowiednią siecią WIFI urządzenia.

P: Dlaczego aplikacja zawsze się zawiesza?
O: Prawdopodobnie z powodu słabej baterii, spróbuj ponownie po pełnym naładowaniu urządzenia.
P: jak długo może być używany po pełnym naładowaniu?
Odp.: Proszę być używany nieprzerwanie przez 60 minut, gdy jest podłączony do telefonu komórkowego i przez 90 minut, gdy nie jest podłączony do telefonu komórkowego.
I Ochrona środowiska |

1. Ten produkt oraz materiały opakowaniowe i akcesoria nadają się do recyklingu.
2. Podzielić odpady na różne poziomy recyklingu, aby ułatwić recykling użytecznych materiałów.

Ochrona i serwis

- 1.inFace zapewnia roczną gwarancję na standard obsługi produktów. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu.
2. W okresie gwarancyjnym, w przypadku awarii produktu spowodowanej wadami materiału lub procesu produkcyjnego, wymienimy odpowiednio części lub cały produkt.
3. Aby ubiegać się o gwarancję, produkt i dowód (faktura zakupu) potwierdzający datę zakupu należy przekazać sprzedawcy.
- 4.Gwarancji nie podlegają następujące warunki:
@Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, na przykład: użycie niewłaściwego zasilacza, włożenie produktu do nieodpowiedniego gniazdka, uszkodzenie spowodowane przez człowieka itp.
@Starzenie się i zużycie produktu spowodowane normalnym użytkowaniem.
@Do innych celów lub niewłaściwej obsługi lub nieprofesjonalnej konserwacji i używania akcesoriów innych niż nasza firma, powodując problemy z produktem.
@Materiały eksploatacyjne, akcesoria itp.
@Uszkodzenia spowodowane czynnikami siły wyższej (np. piorun, trzęsienie ziemi, powódź itp.).
Uwaga: Nigdy nie zanurzaj przyrządu w wodzie. Uszkodzenia maszyny spowodowane czynnikami ludzkimi nie są objęte gwarancją. W przypadku jakichkolwiek zmian na powyższej liście pierwszeństwo mają odpowiednie przepisy nowo sformułowane przez firmę lub odpowiednie przepisy ustawowe i wykonawcze zaktualizowane przez kraj.



Przetwarzanie odpadów
Ta etykieta na tym produkcie, w instrukcji obsługi lub na opakowaniu wskazuje, że produkt nie może być wyrzucany jako zwykłe odpady domowe pod koniec jego okresu użytkowania. Skonsultuj się z władzami lokalnymi w sprawie recyklingu zgodnie z klasyfikacją 2 odpadów. Proszę wyjąć baterię z urządzenia przed wyrzuceniem urządzenia i należy wyłączyć urządzenie podczas wyjmowania baterii; akumulator należy bezpiecznie zutylizować.

Informacje o firmie: Shenzhen Migoosmart Co., Ltd.
Adres: Rm.807, budynek U6, Junxiang U8 Intelligent
Manufac-Turing Industrial Park, Gushu Community, Xixiang
Sub-District,
Dzielnicia Bao'an, Shenzhen, Chiny
E-mail: service@migoosmart.com Kod pocztowy: 518000
Oficjalna strona internetowa: www.migoosmart.com

Opakowanie zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska. To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19 / UE dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Dyrektywa WEEE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego). Dyrektywa określa ramy zwrotu i recyklingu zużytego sprzętu, które mają zastosowanie w całej UE. Zapytaj swojego sprzedawcę o aktualne punkty odbioru. Deklaracja zgodności UE

